



SPEAKBOOK

Knip hierdie deel uit.

nie-verbale kommunikasiestelsel

acecent.re/speakbook

Speakbook 5de uitgawe © 2020 Patrick Joyce & Ace Centre, Vertaal op Emma
Emmerich



Knip hierdie deel uit.

Knip hierdie deel uit.

SPEAKBOOK


Speakbook is 'n nie-verbale kommunikasie hulpmiddel vir mense wat nie kan praat nie en probleme ondervind om hul hande of arms te gebruik, maar wat die gebruik van hul oë behou. Hierdie uitgawe is vir mense wat kan lees en spel. Besoek acecent.re/speakbook vir weergawes vir nie-lesers, weergawes in ander tale en die sak uitgawe.

Gebruiksaanwysings.

Om te begin, benodig u; die speakbook, 'n swart, nie-permanente witbordpen, 'n lap om uit te vee en 'n maat wat praat.

U en u maat sit teenoor mekaar ongeveer 90cm uitmekaar. Afhangend van u sig, kan u hierdie afstand verminder of verhoog. Maak die speakbook oop op die oefenblad binne die agterblad. Dit is reeds ingevul om u te help om die basiese tegniek te leer. As u dit bemeester het, kan u u eie bladsye skryf met behulp van die leë bladsye. Vou die boek op homself terug en hou dit tussen u op, sodat u albei na 'n 'oefenbladsy' kyk, en mekaar se oë deur die gat in die middel kan sien. U kyk nou na die keuses op die bladsy om te besluit watter een u wil kommunikeer. As u besluit het, dui u aan u maat aan dat u gereed is om te begin - dit kan wees deur na u maat te kyk en u oë te knip, of deur u oë op en af te beweeg- wat u ook al pas. Kyk dan vir 'n sekonde na die boodskap wat u wil hê, gevolg deur die groot simbool dieselfde as die kleintjie langs die boodskap. Jou maat volg dan jou oogbewegings - hy sien byvoorbeeld dat jy aan die linkerkant van die bord gekyk het, gevolg deur die groot driehoek, sodat hy weet dat jy 'koppie tee' wil sê. Hy sê dan: 'koppie tee!' hardop, en u bevestig dit met 'n oogwink of met 'n ander vooraf ooreengekomde sein

Dit is die basiese tegniek vir die gebruik van die praatboek. Nou moet u leer hoe om die ander bladsye in die boek te gebruik, want die waarde van die speakbook lê in die vermoë om u maklike toegang te gee tot honderde frases wat u self kies en enige tyd kan verander, met net 'n klam lap en 'n pen.

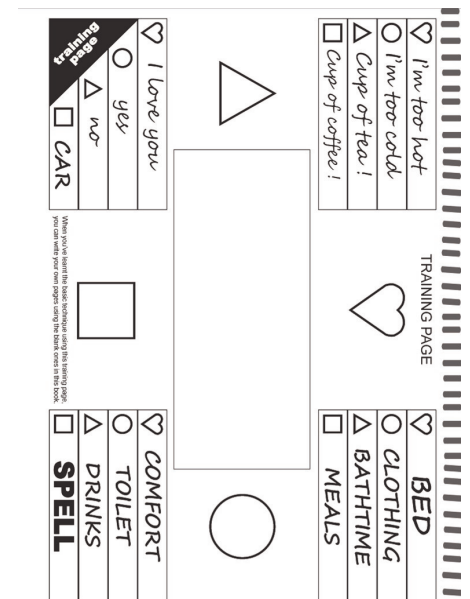

Hoe om op die praatboek te skryf

Presies wat u in die speakbook skryf, sal afhang van u spesifieke vereistes, maar wat ook al u skryf, is dit belangrik dat elke kant van elke dubbele bladsy dieselfde teks daarop het, en dat hulle 'n spieëlbeeld van mekaar is - soos in die voorbeeld hierbo. Praat u en u maat verskillende tale? Geen probleem nie - skryf net 'n ander taal aan weerskante.

Elke bladsy van die speakbook bevat 14 of 15 leë gedeeltes waarop u u eie teks kan skryf. Om die gebruiker tussen die verskillende bladsye te laat beweeg, het ons die 'tuisblad' geskep. Dit word aan die voorkant van die boek aangetref en is gemerk met 'n swart 'TUIS'-oortjie aan die rand van die bladsy. Die idee is dat u die 7 frases wat u die meeste gebruik op hierdie bladsy skryf, aangesien dit die bladsy is waarop u altyd begin. Op 8 van die leë stroke skryf u ook skakels na die ander agt leë dubbele bladsye. Dit moet die dele van u lewe wees wat meer gedetailleerde frases benodig, dit kan areas soos badtyd wees of met die kar uitgaan. Links is 'n voorbeeld van 'n moontlike uitleg vir die 'TUIS'-bladsy. Die agt woorde in vetdruk met hoofletters is skakels na dubbelsydige bladsye elders in die boek. Vind 'n leë bladsy en skryf byvoorbeeld 'BED' op die oortjie. Skryf nou die 14 belangrikste frases wat verband hou met u bedtydroetine. Herhaal die proses vir die ander 7 skakels totdat u boek vol is. As u 'n fout maak of 'n frase wil verander, vee dit uit met 'n klam lap en begin weer.

Om die speakbook te gebruik, dui u aan u maat dat u wil kommunikeer. U maat open die speakbook op die

Knip hierdie deel uit.








'TUIS'-bladsy en u kies byvoorbeeld 'BED'. U maat blaai dan na die 'BED'-bladsy en u kan dan aandui: 'Ek wil gaan slaap' - of wat ook al. Elke bladsy het 'TUIS' en 'SPEL' wat vooraf gedruk is. Die 'TUIS' is so dat u altyd weer op die 'TUIS'-bladsy kan terugkom (u wil dalk hê dat 'n koppie tee' saam met u bed toe moet gaan). Op die 'SPEL'-bladsy kan u individuele woorde en frases uitspel wat nie elders in die boek voorkom nie. Dit werk op 'n soortgelyke manier as die ander bladsye, met een verskil. Op hierdie bladsy is daar 6 gekleurde blokke, elk met 6 gekleurde letters of syfers daarop. Die hele alfabet is daar, plus getalle 1-9 (gebruik die letter O vir nul). U kyk na die letter wat u wil gebruik, vir ongeveer 'n sekonde, gevolg deur die gekleurde blokkie van dieselfde kleur as u gekose letter. Jou maat volg jou oë, sien dat jy byvoorbeeld na die boonste linkerblok gekyk het, gevolg deur die boonste regterkantste blok (wat groen is), en weet dat jy 'C' wil hê. Jou maat sê 'C' hardop om te bevestig, en jy gaan voort na die volgende letter. U maat raai die res van die woord, indien









moontlik, om die proses te bespoedig.

Praatboek het plek vir 119 frases wat u kies. As dit nie voldoende is nie, of as u meer as 14 frases in een spesifieke afdeling benodig, kan u die kapasiteit verdubbel deur twee frases op elke reël te skryf, een in swart pen, een in rooi. U kies 'n swart frase op die normale manier, 'n rooi deur te knip wanneer u na die groot simbool kyk.

Knip hierdie deel uit.

Knip hierdie deel uit.

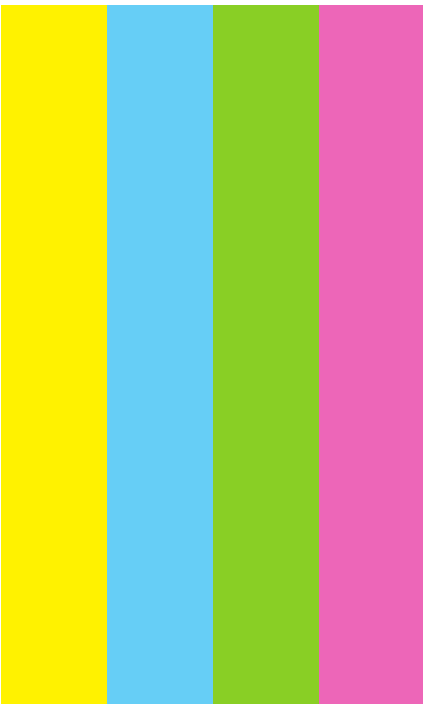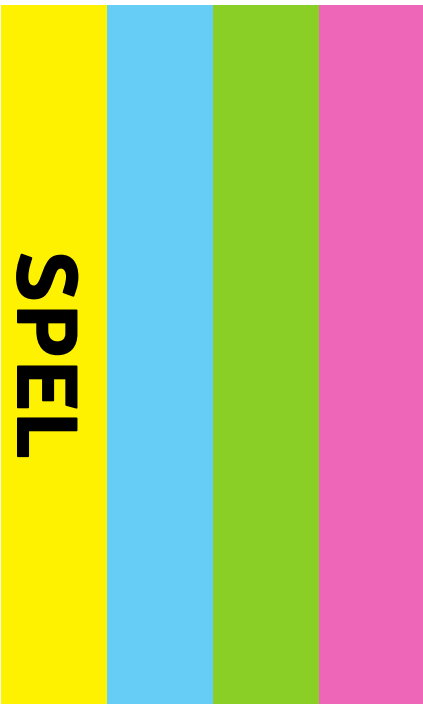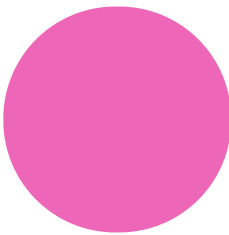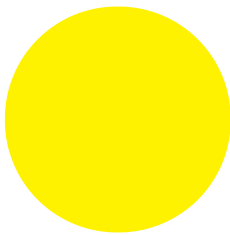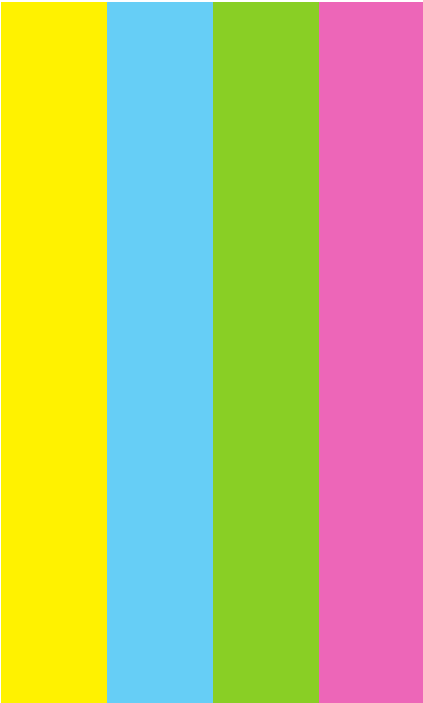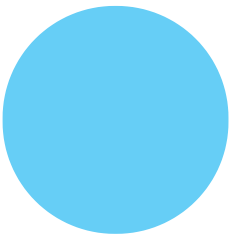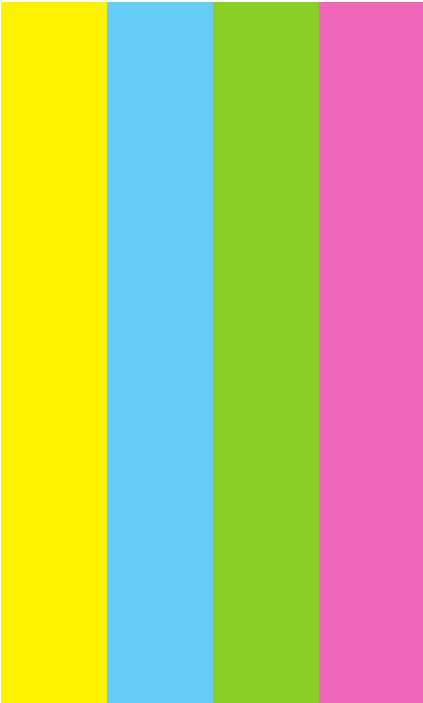

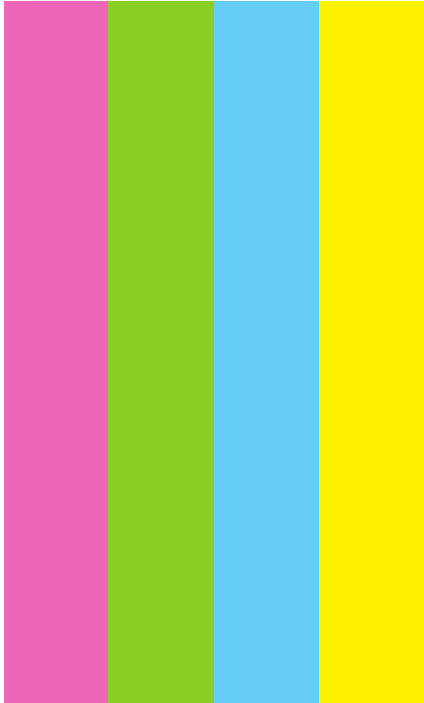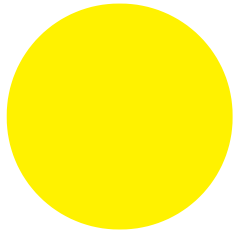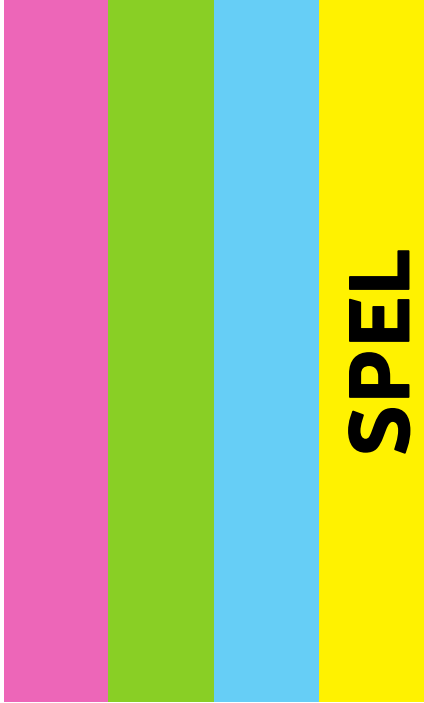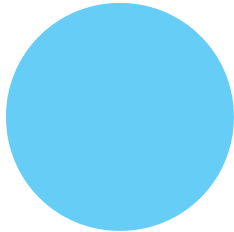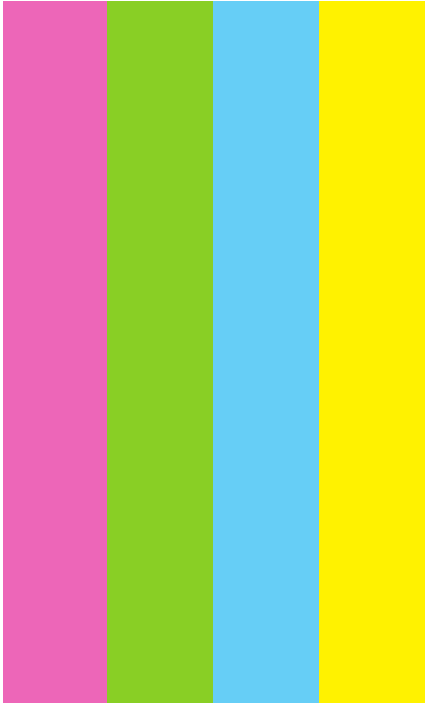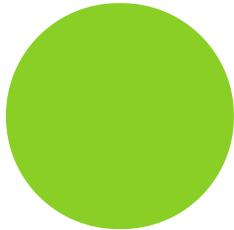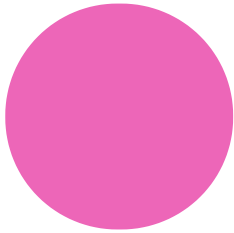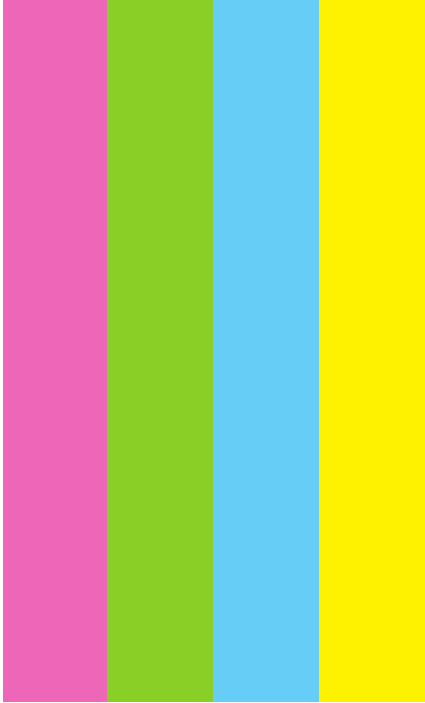







SPEL

Knip hierdie deel uit.



Knip hierdie deel uit.

TUIS

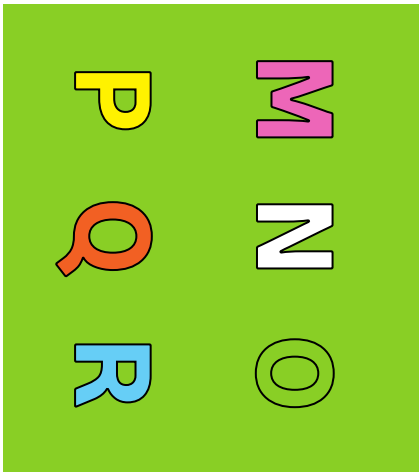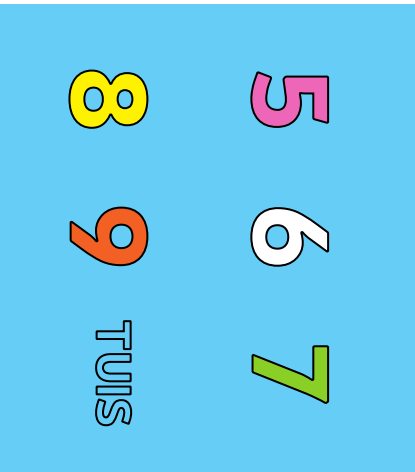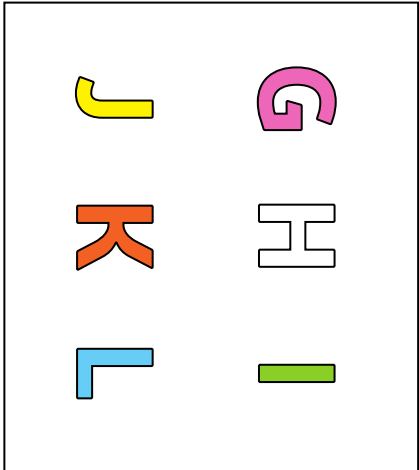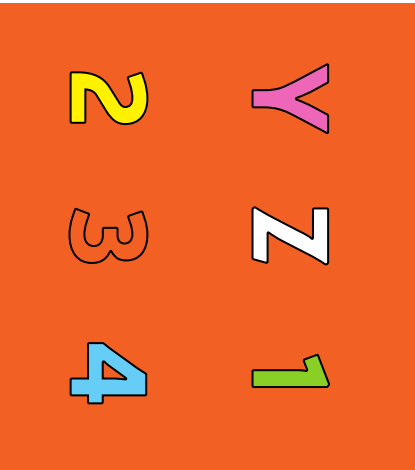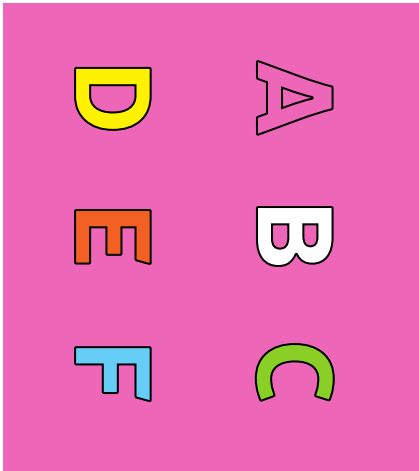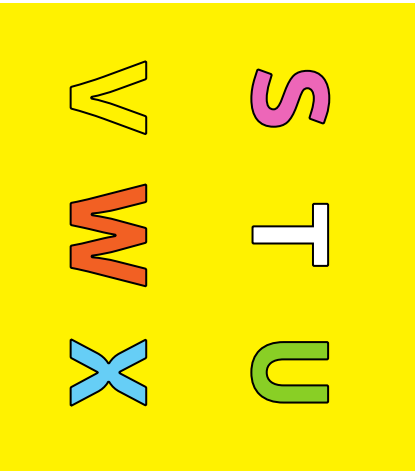

O	N	M
R	Q	P

I	H	G
L	K	J

C	B	A
F	E	D

Knip hierdie deel uit.

7	6	5
TUIS	9	8

1	Z	Y
4	3	2

U	T	S
X	W	V

Knip hierdie deel uit.







Knip hierdie deel uit.










SPEL

TUIS

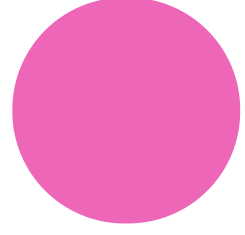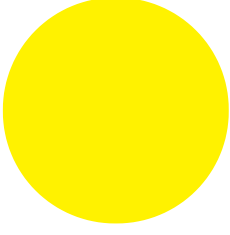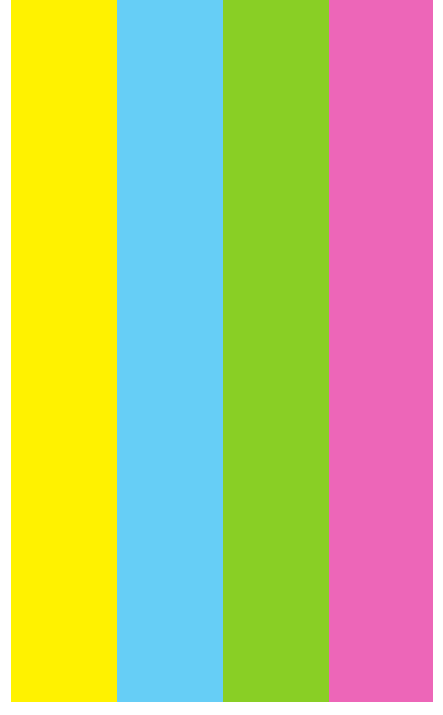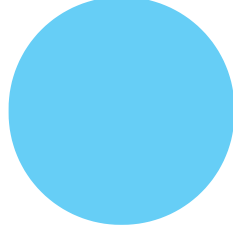


SPEL

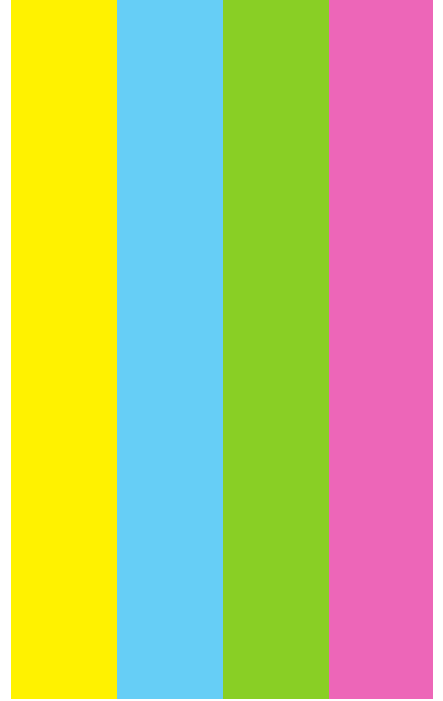
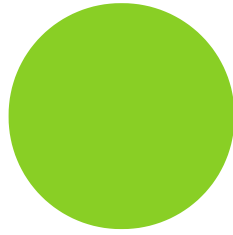


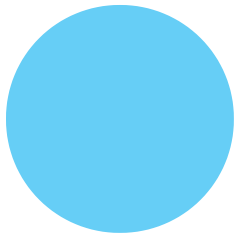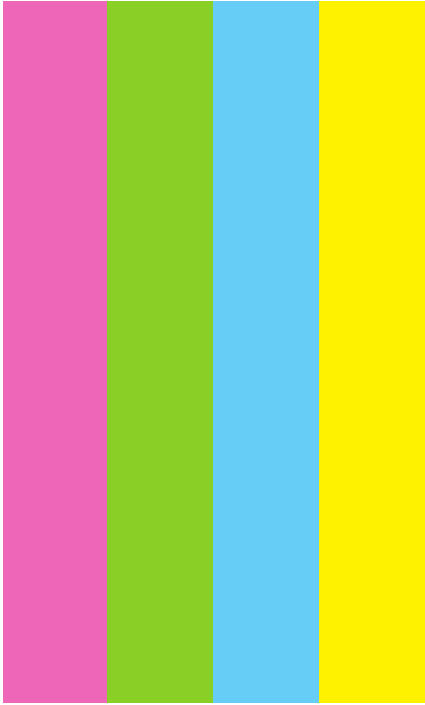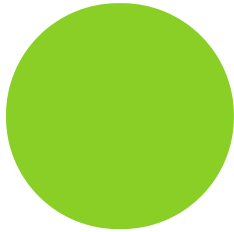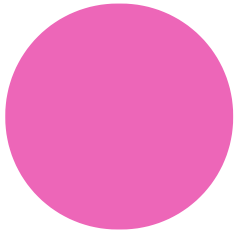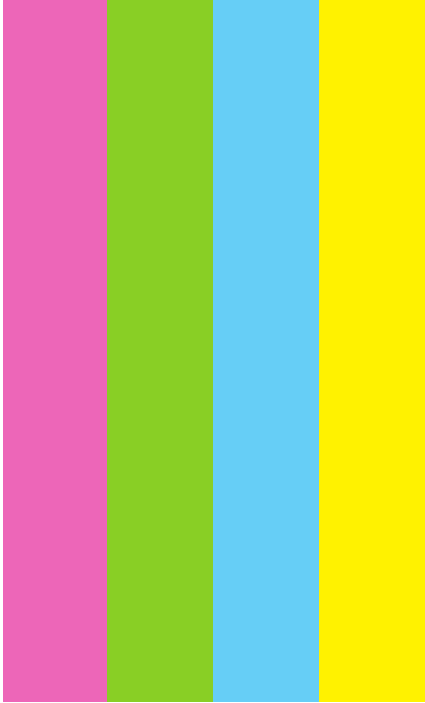

Knip hierdie deel uit.

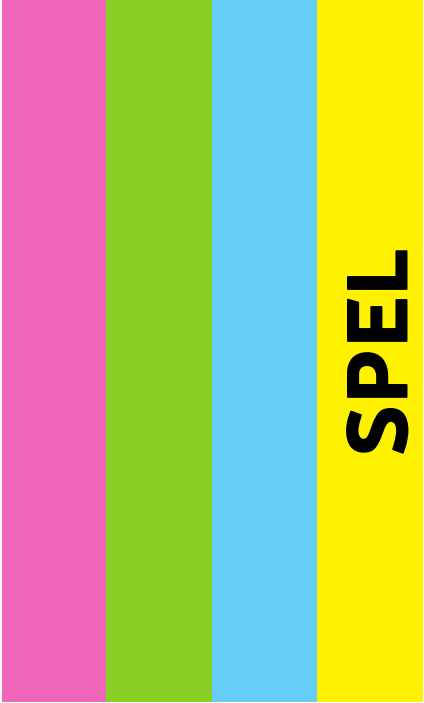

SPEL

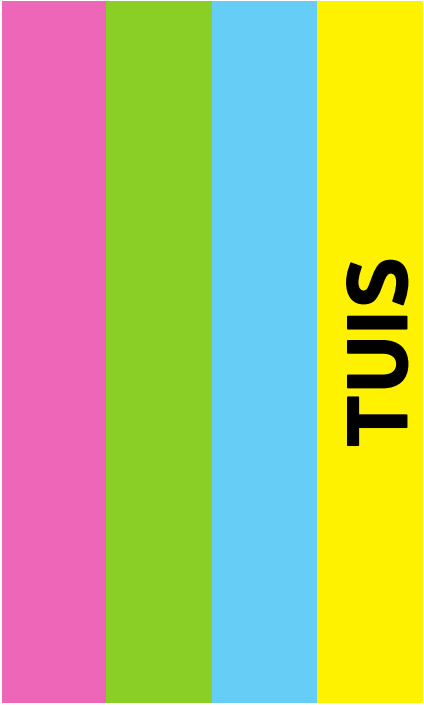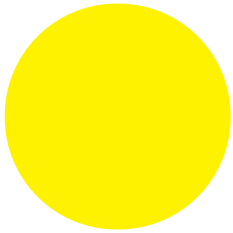





TUIS





Knip hierdie deel uit.








TUIS

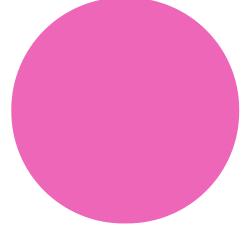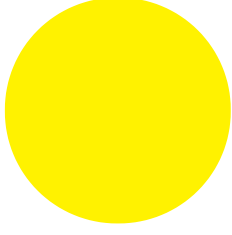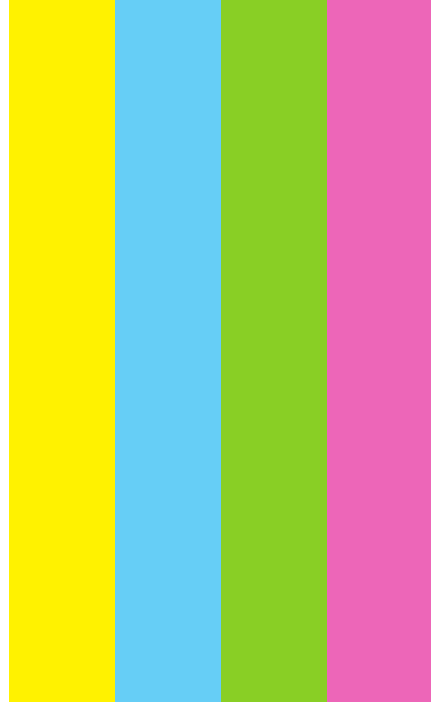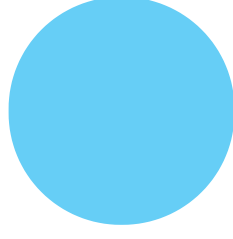


SPEL

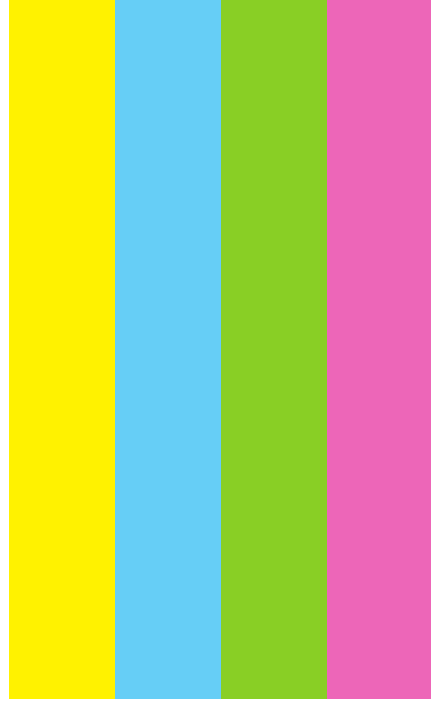
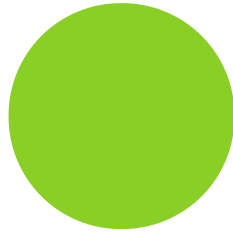


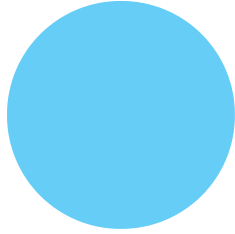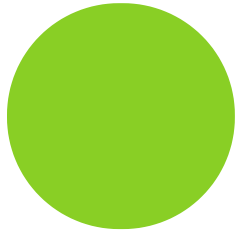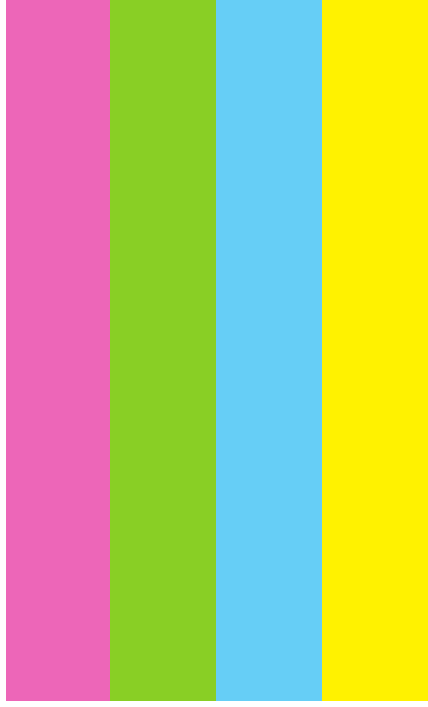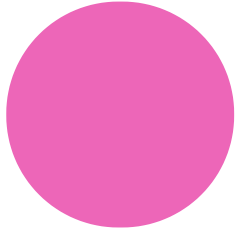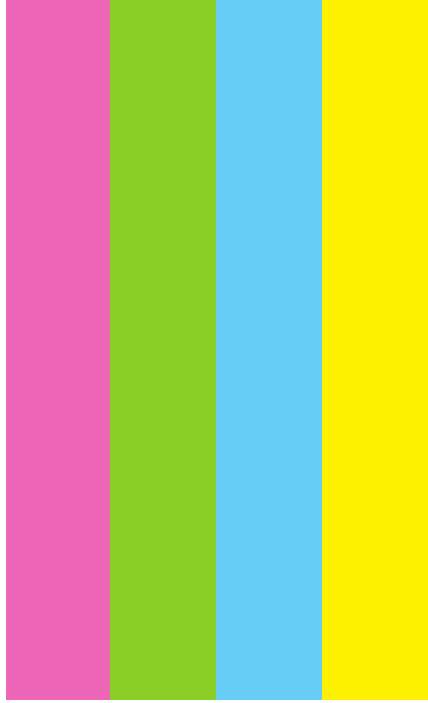


Knip hierdie deel uit.

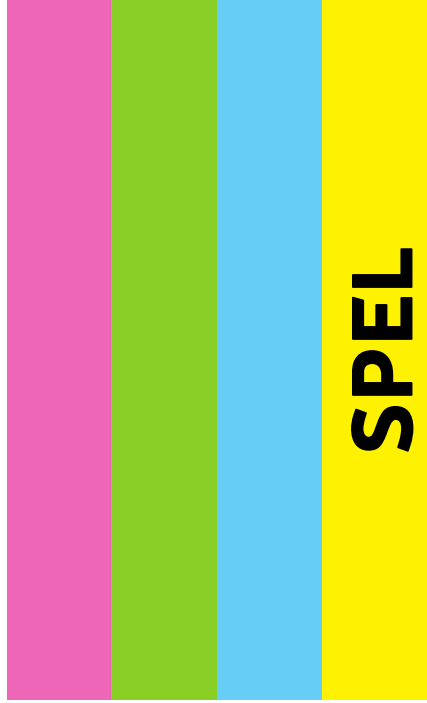

SPEL

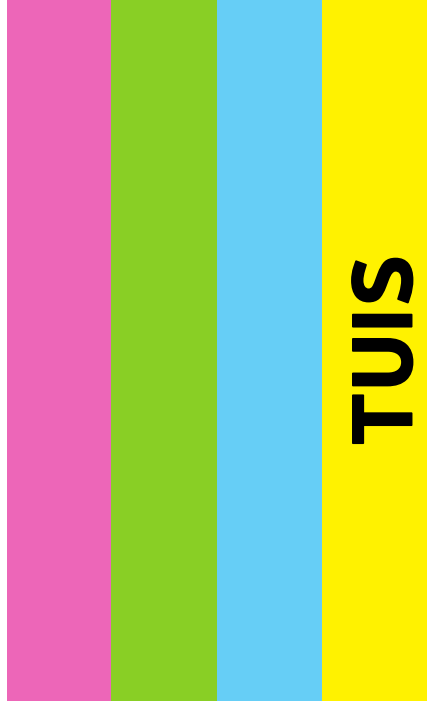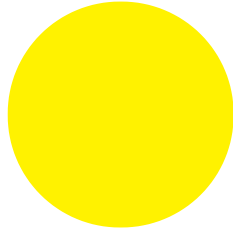





TUIS

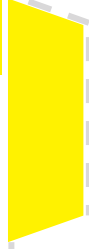



Knip hierdie deel uit.









TUIS

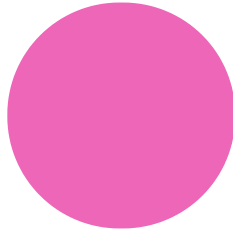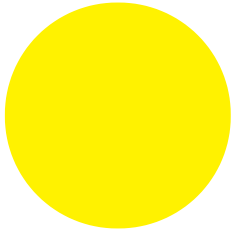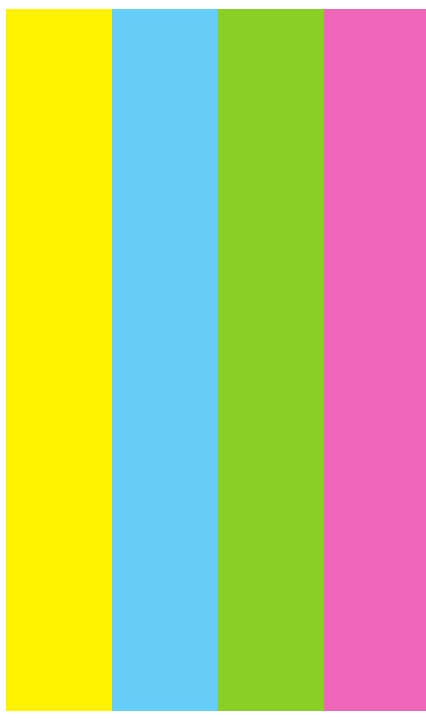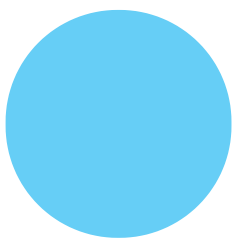


SPEL

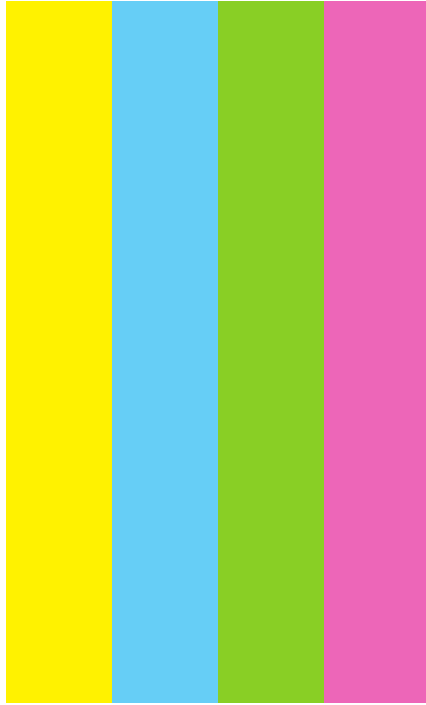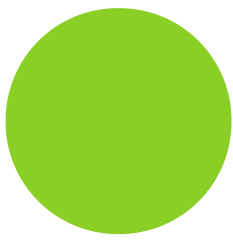

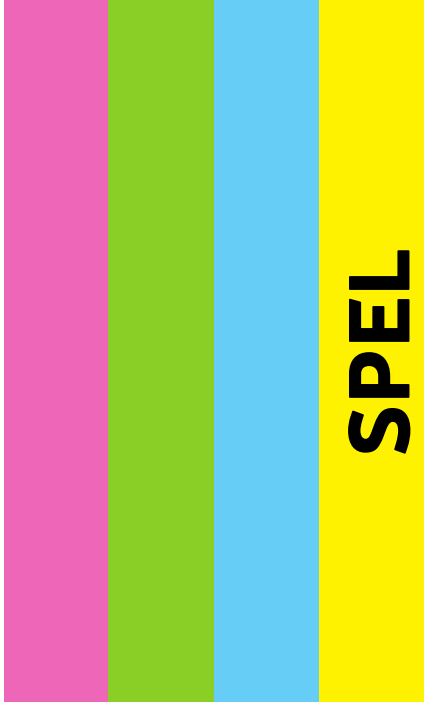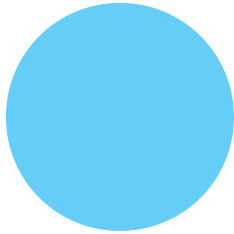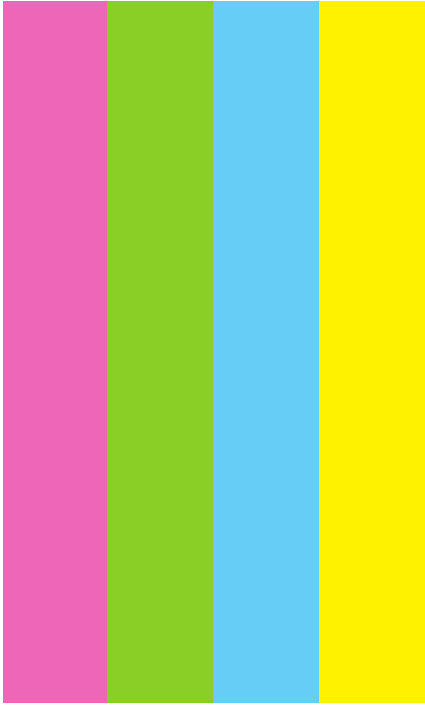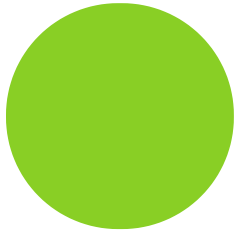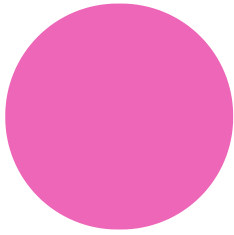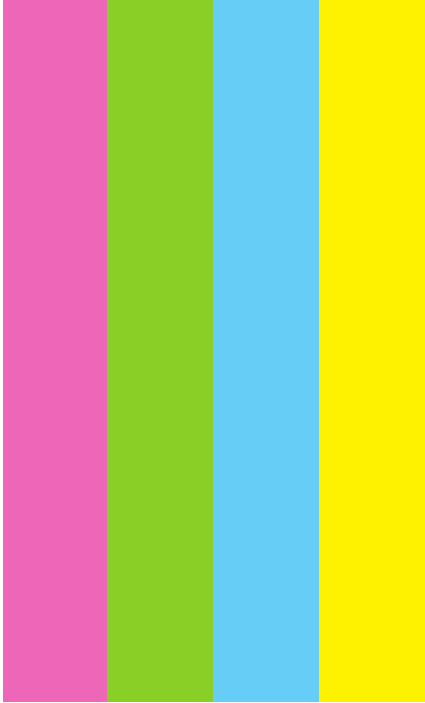

SPEL

Knip hierdie deel uit.




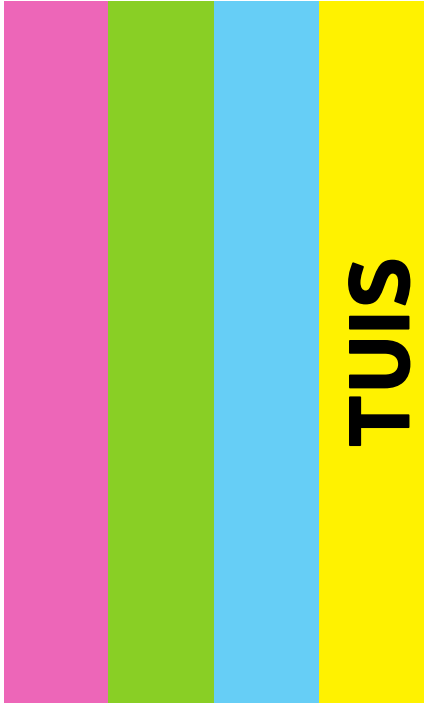


TUIS



Knip hierdie deel uit.









TUIS

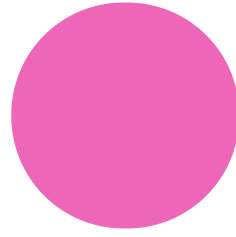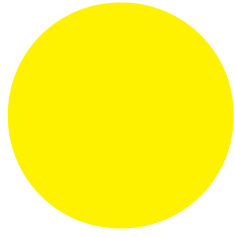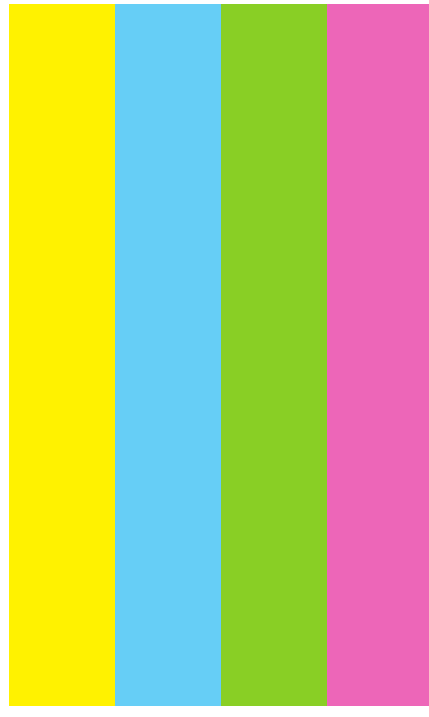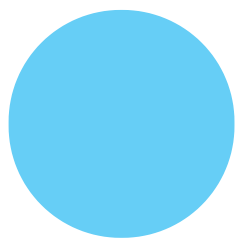


SPEL

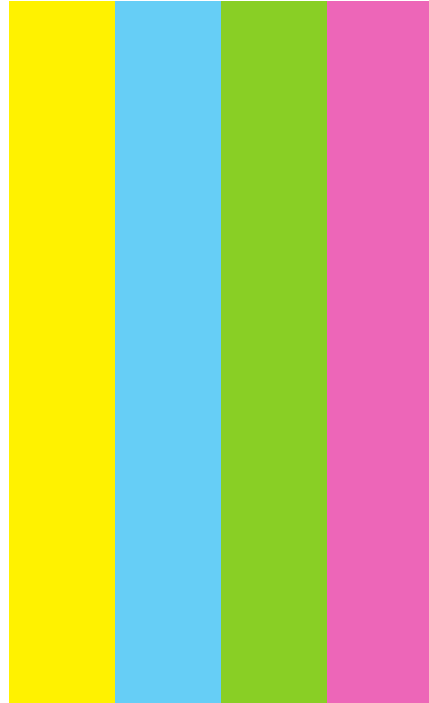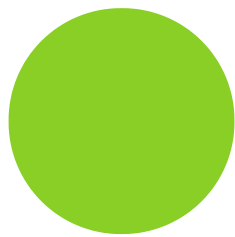

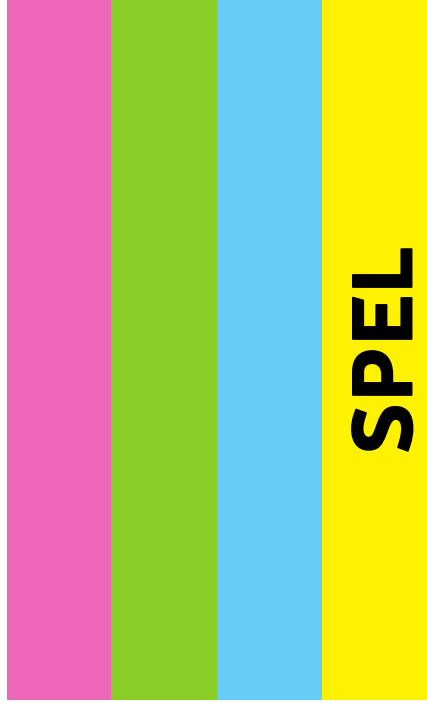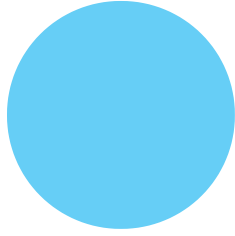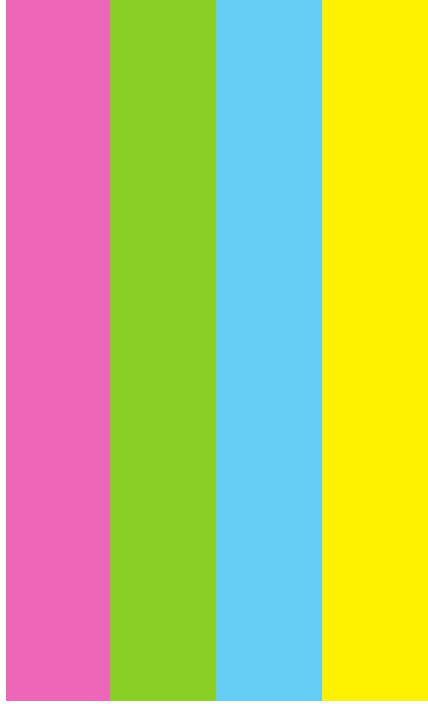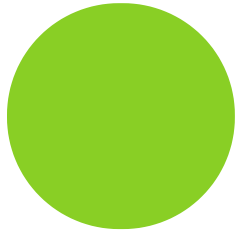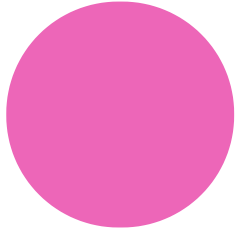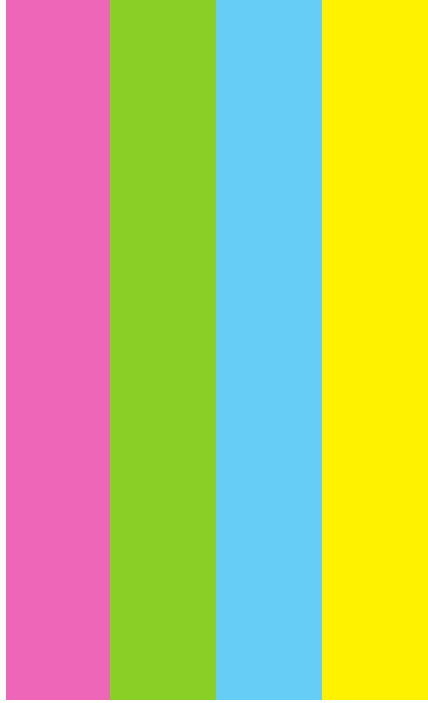

SPEL

Knip hierdie deel uit.




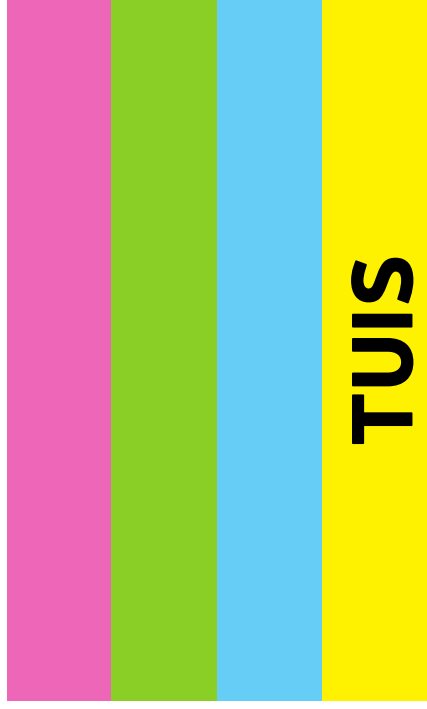


TUIS


Knip hierdie deel uit.









TUIS

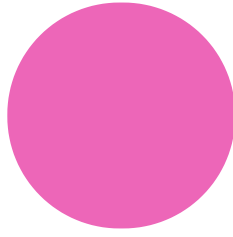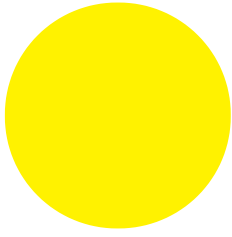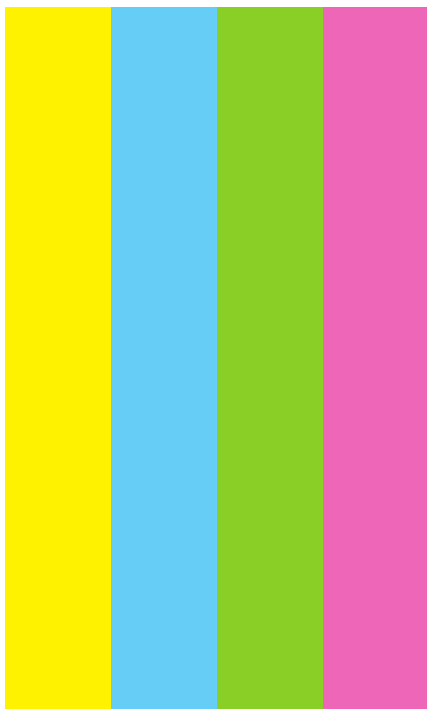
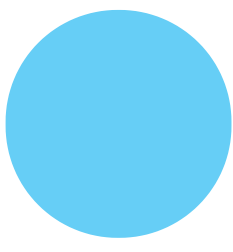


SPEL

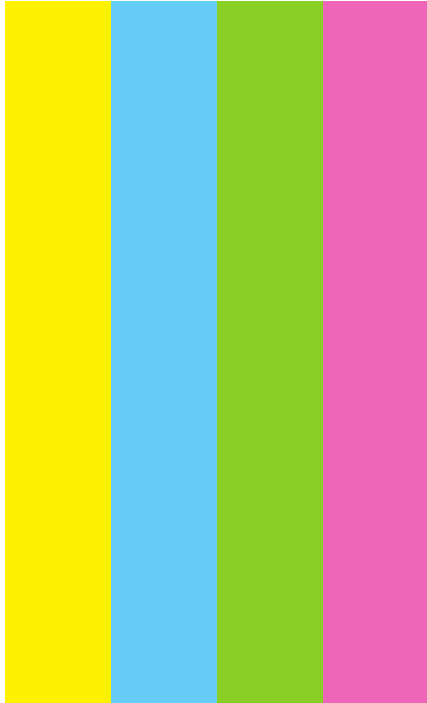

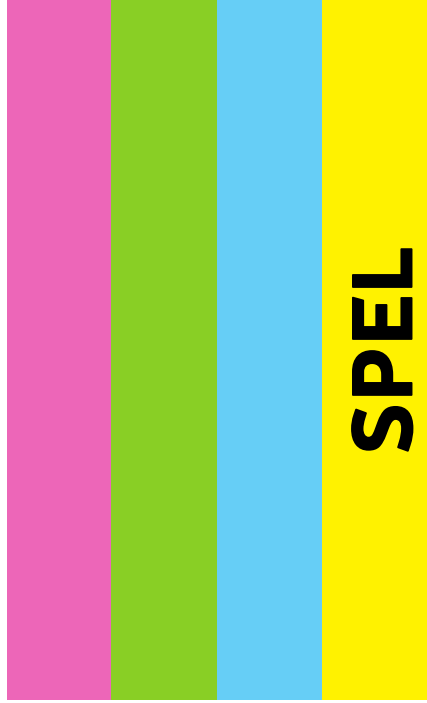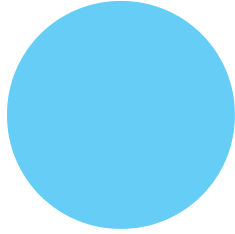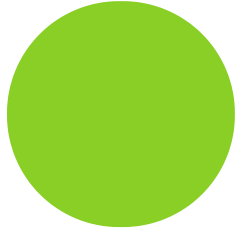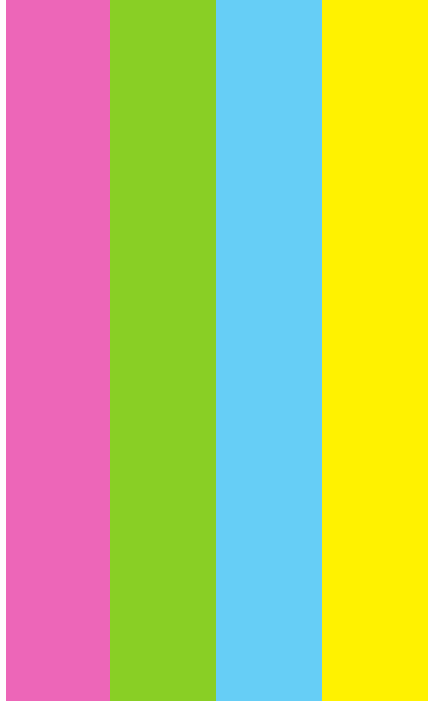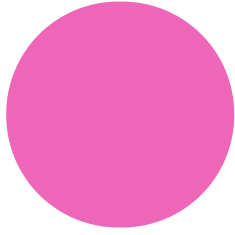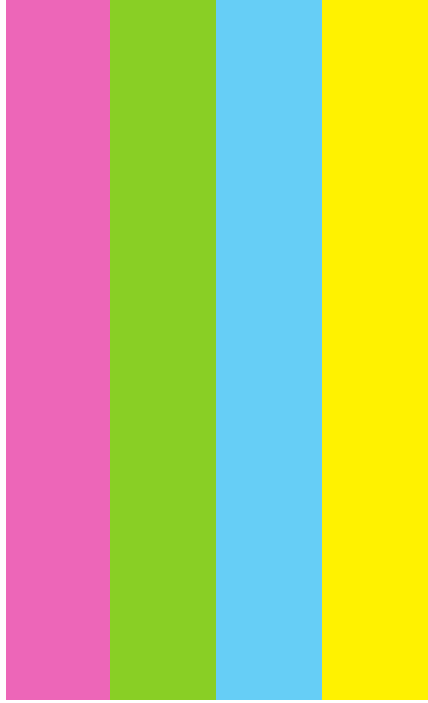

SPEL

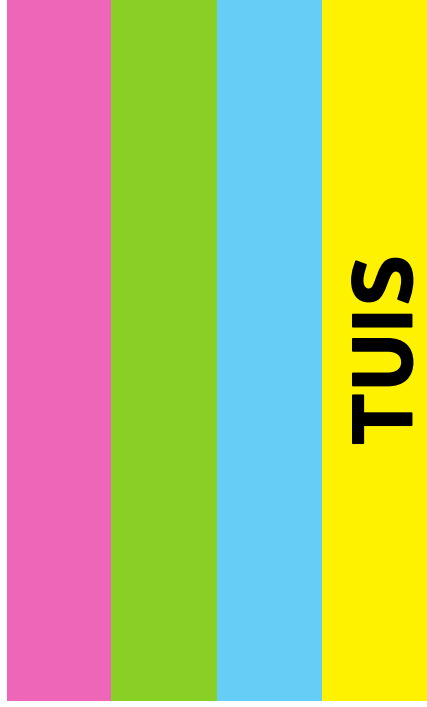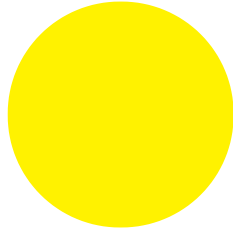





TUIS




Knip hierdie deel uit.









TUIS

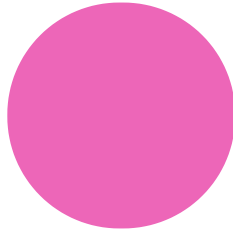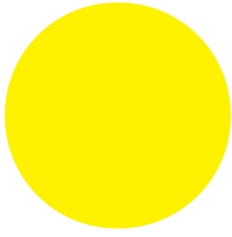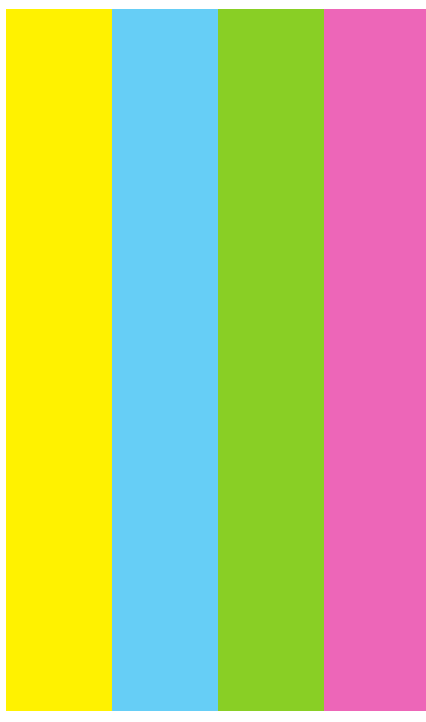
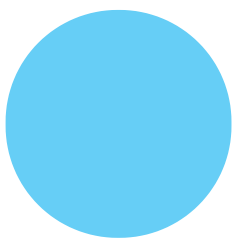


SPEL

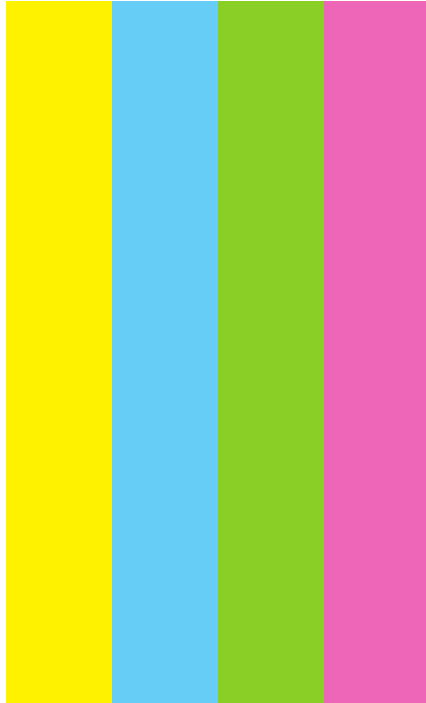

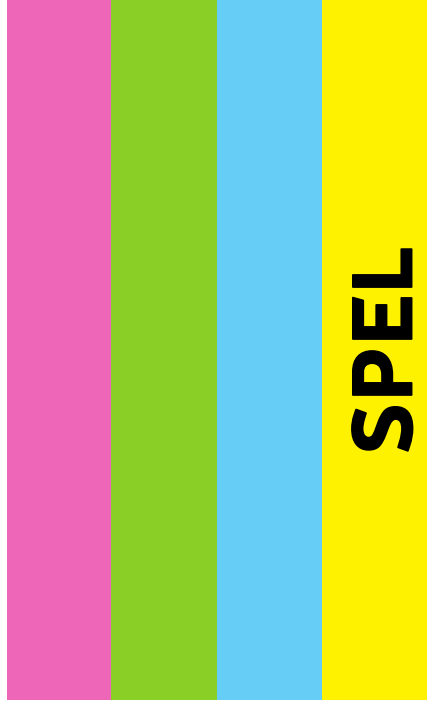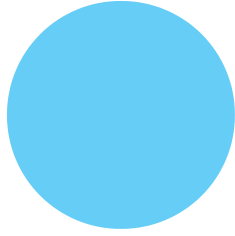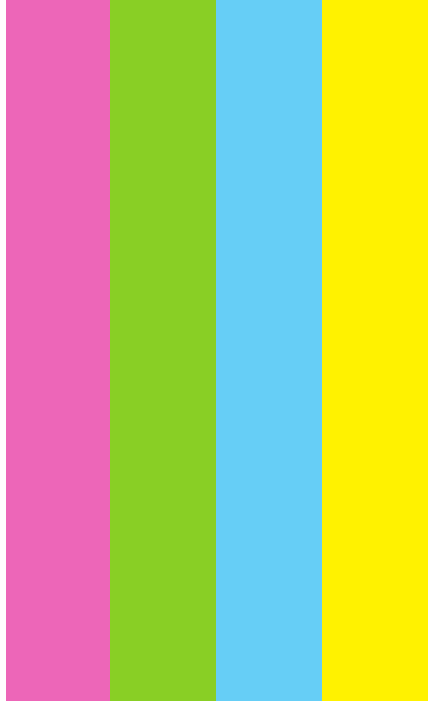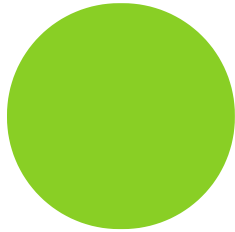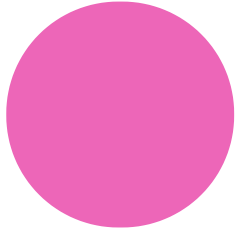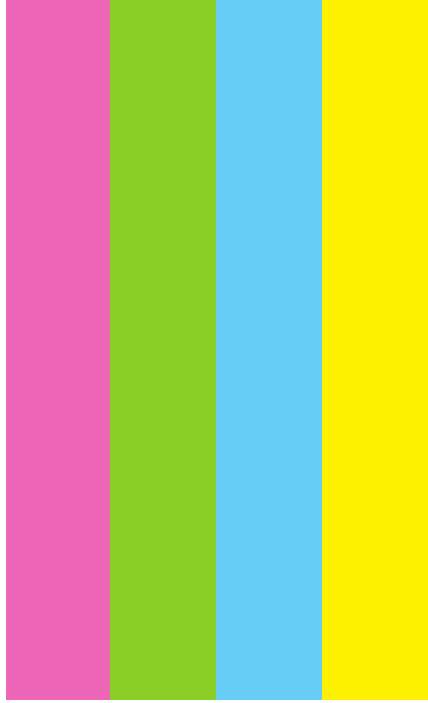

SPEL

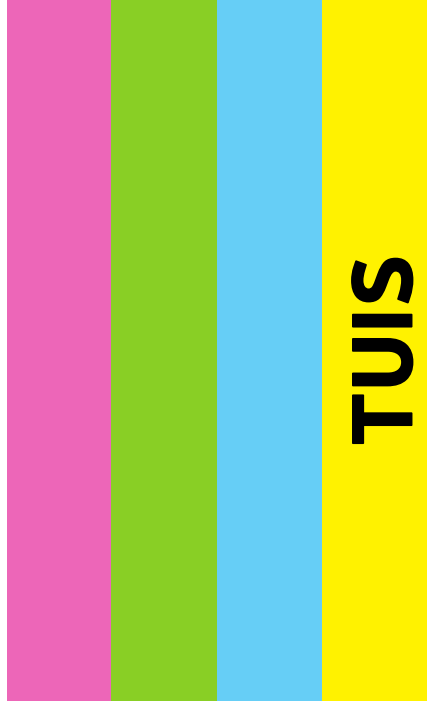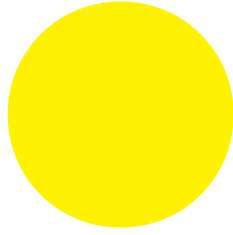





TUIS




Knip hierdie deel uit.









TUIS

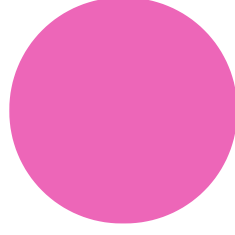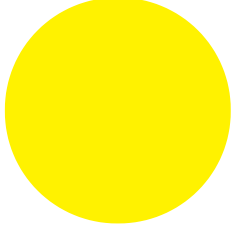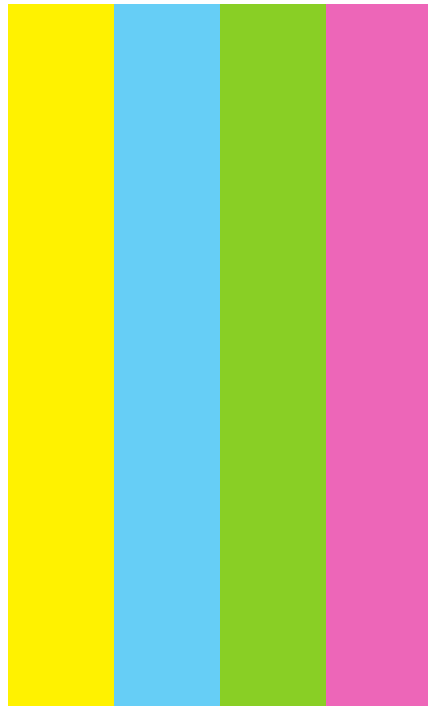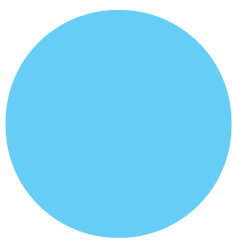


SPEL

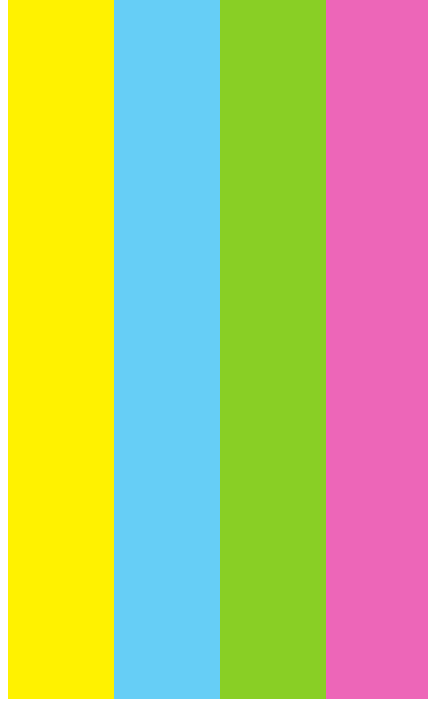

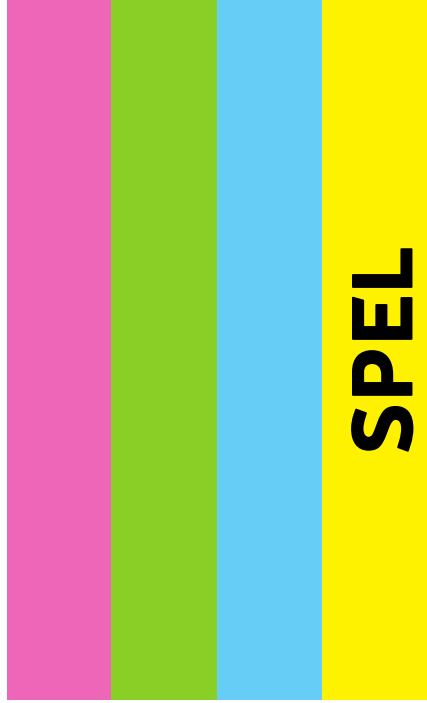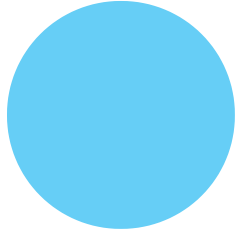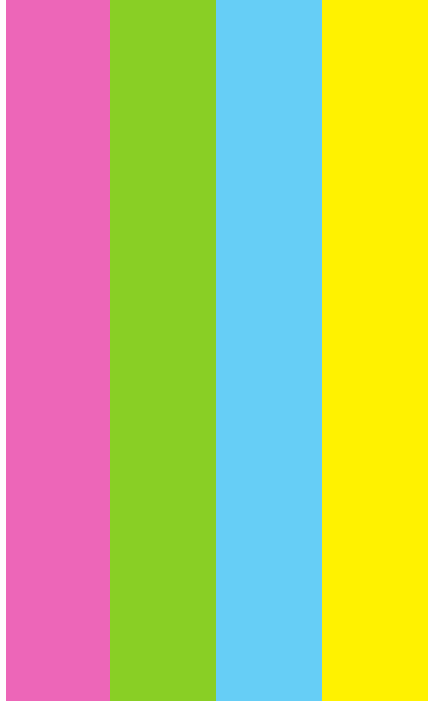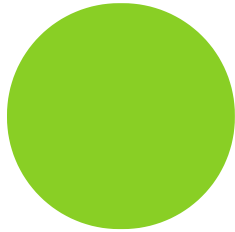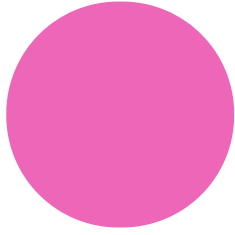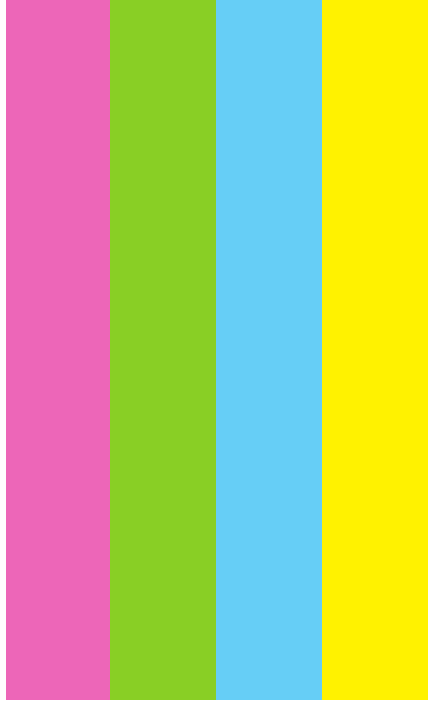

SPEL




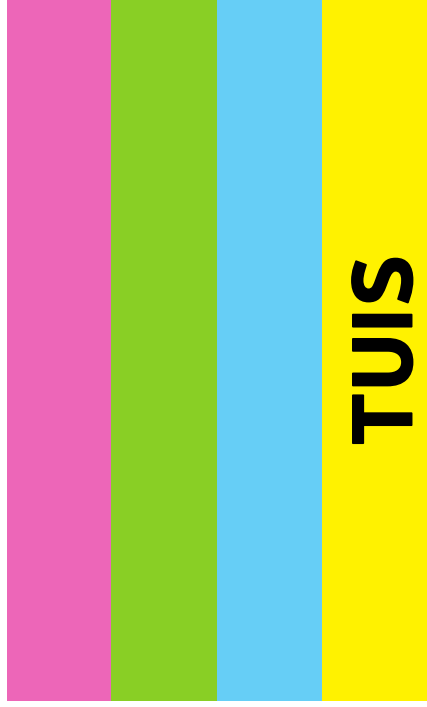


TUIS











Knip hierdie deel uit.

TUIS

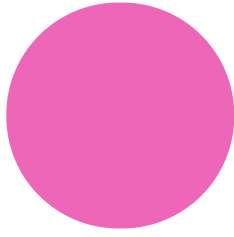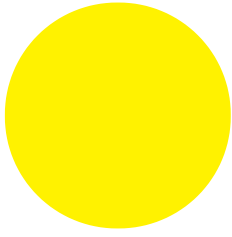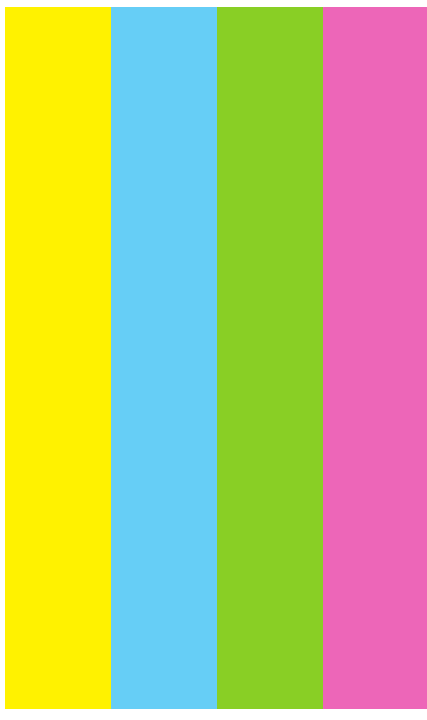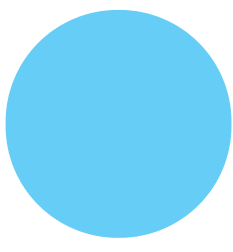


SPEL

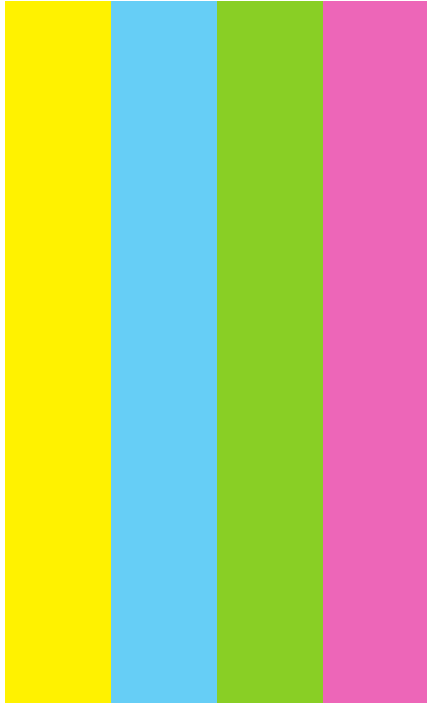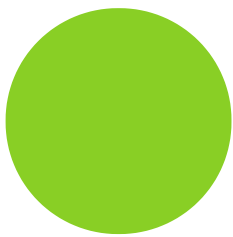

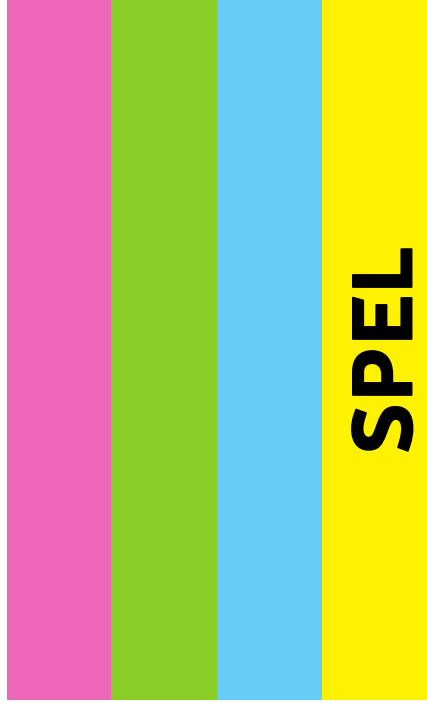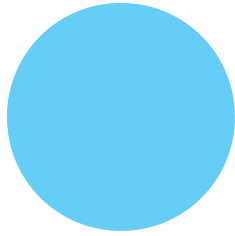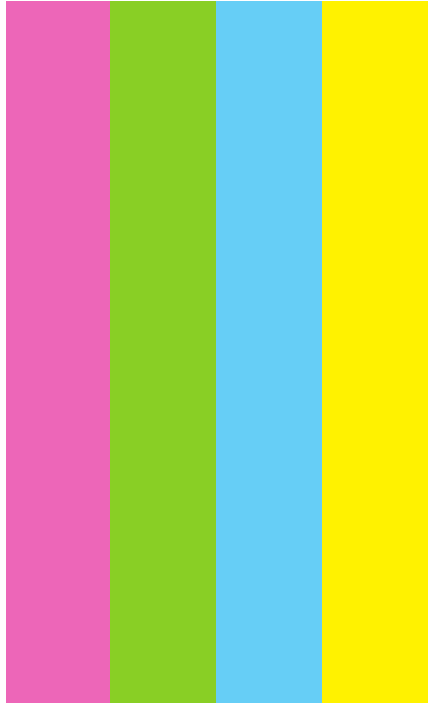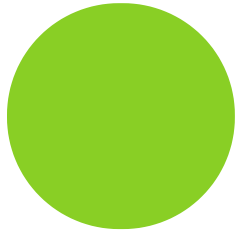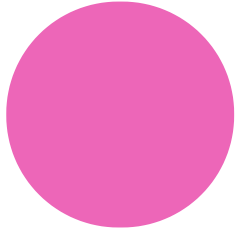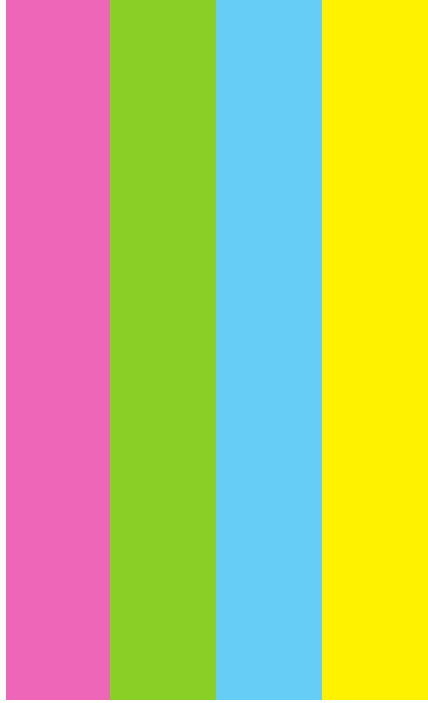

SPEL

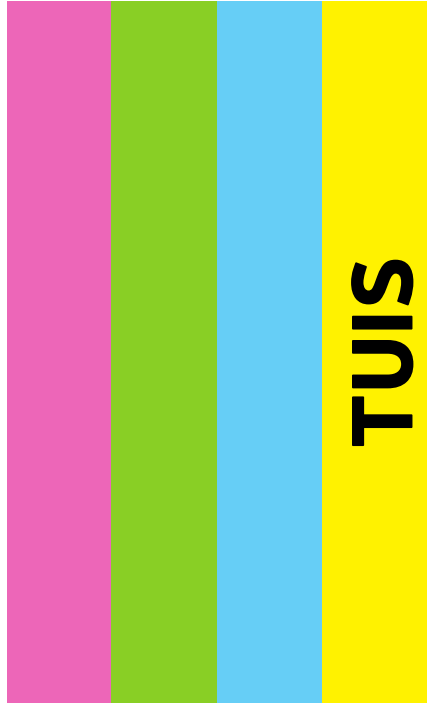

TUIS



Knip hierdie deel uit.



Ek kry warm

Ek kry koud

Koppie tee!

Koppie koffie!

OPLEIDINGSBLAD

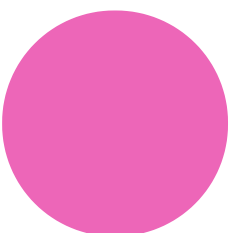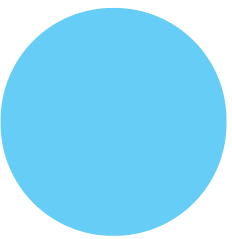

BED

KLERE

BADTYD

ETES



Ek is lief vir jou


ja

nee

KAR

opleidingsblad

As u die basiese tegniek geleer het deur hierdie opleidingsblad, kan u u eie bladsye skryf met behulp van die lee bladsye in die boek.

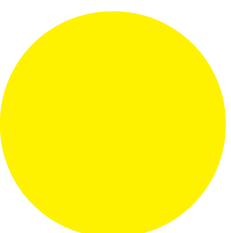

GEMAK

TOILET

DRANKIES

SPEL




BED

KLERE

BADTYD

ETES

OPLEIDINGSBLAD

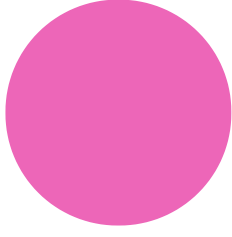


Ek kry warm


Ek kry koud

Koppie tee!

Koppie koffie!

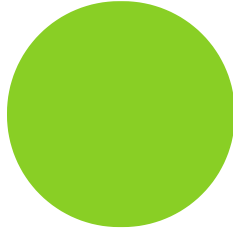

Knip hierdie deel uit.

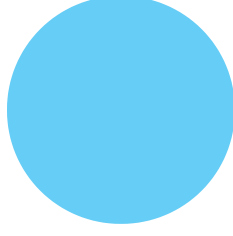


GEMAK

TOILET

DRANKIES

SPEL

As u die basiese tegniek geleer het deur hierdie opleidingsblad, kan u u eie bladsye skryf met behulp van die leë bladsye in die boek.

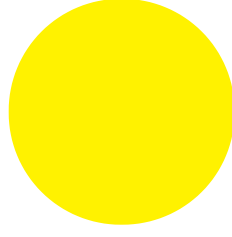

Ek is lief vir jou

ja

nee

KAR



Knip hierdie deel uit.

Knip hierdie deel uit.

Vinger spel bladsy.

As u nog steeds die gebruik van u hande het, is hierdie bladsy vir u. Spel woorde en frases uit aan u maat deur met 'n vinger te wys. Woorde wat gereeld gebruik word, kan in die leë blokkies geskryf word. As u na die woord **"TUIS"** * wys, dui dit aan u maat dat u nou met u oë wil kommunikeer met behulp van die hoofboek.

R	\$	%							
+	-	/					1	2	3
X	=	?					4	5	6
TUIS							7	8	9
DANKIE							♥	0	😊
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
A	S	D	F	G	H	J	K	L	@
Z	X	C	JA	V	NEE	B	N	M	