



SPEAKBOOK

قطع هذا الجزء.

قطع هذا الجزء.

قطع هذا الجزء.



غير النظام لفظية

acecent.re/speakbook

Speakbook 5th الطبعة © 2020 باتريك جويس


SPEAKBOOK

Speakbook هو أداة الاتصال اللفظي غير بالنسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون الكلام ويجدون صعوبة في استخدام أيديهم أو أذرعهم، ولكن الذين يحتفظون استخدام أعينهم. هذه الطبعة هي للأشخاص الذين يستطيعون القراءة والتهجئة. للحصول على إصدارات لغير القراء، اللغات الأجنبية، وطبعة الجيب، acecent.re/speakbook وزيارة

تعليمات الاستخدام.

لتبدأ، ستحتاج. و speakbook، أسود، قلم السبورة غير الدائمين، قطعة قماش لفرك بها، وشريك التحدث.

أنت وشريك يتحدث بك الجلوس عكس بعضها البعض نحو ثلاثة أقدام بعيدا. اعتمادا على البصر، قد تجد أنه من المفيد خفض أو زيادة هذه المسافة. فتح speakbook إلى صفحة التدريب داخل الغطاء الخلفي. يتم تعبئة هذا في سبق لمساعدتك على تعلم هذه التقنية الأساسية. عند "لقد أتقن ذلك، يمكنك إرسال صفحاتك الخاصة، وذلك باستخدام تلك فارغة المقدمة. طي ظهر كتاب عن نفسها وعقد ليصل بينك، لذلك كنت على حد سواء تواجه "صفحة التدريب"، ويمكنك أن ترى كل عيون الآخرين من خلال ثقب في الوسط. أنت الآن ننظر في الخيارات على الصفحة لاتخاذ قرار واحد للاتصال. عند "لقد قررت، كنت تشير إلى شريك حياتك أن تكون مستعدا لبدء - وهذا يمكن أن يكون من خلال النظر في شريك حياتك وامض، أو عن طريق الهز عينيك صعودا وهبوطا - أيا كان يناسبك. بعد ذلك ننظر في الرسالة التي تريدها، لثانية أو نحو ذلك، يليه رمز كبير نفس واحدة صغيرة على جانب الرسالة. شريك حياتك ثم يتبع

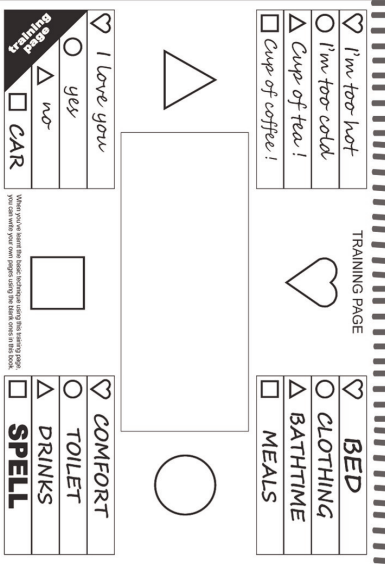

كيفية الكتابة على speakbook

بالضبط ما تكتبه على speakbook سيعتمد على المتطلبات الخاصة بك، ولكن كل ما يكتب، فمن المهم أن كل جانب من أي انتشار الصفحة مزدوج له نفس النص على ذلك، وأنها صورة طبق الأصل من بعضها البعض - كما هو الحال في في المثال أعلاه. هل أنت وشريك حياتك يتكلمون لغات مختلفة؟ لا مشكلة - مجرد كتابة لغة مختلفة على جانبي.

حركات العين الخاص بك - على سبيل المثال انه قد نرى ان كنت قد نظرت في أعلى الجانب الأيسر من لوحة تليها مثلث كبير، لذلك فهو يعرف أنه يجب أن أقول "كوب من الشاي!". ثم يقول: "كوب من الشاي!" بصوت عال، ويجب تأكيد هذا مع طرفة، أو بعض أخرى إشارة رتبت مسبقا

هذا هو الأسلوب الأساسي لاستخدام speakbook. والآن أنت بحاجة لمعرفة كيفية استخدام صفحات أخرى في الكتاب، لأن العبقرية الحقيقية من الأكاذيب speakbook في قدرته على إعطاء لك سهولة الوصول إلى مئات من العبارات التي تختارها الخاصة، العبارات التي يمكن أن تتغير في أي وقت، مع فقط قطعة قماش مبللة وبجرة قلم.

تعليمات


كل صفحة من speakbook فيها 14 أو 15 أقسام فارغة حيث يمكنك كتابة النص الخاص بك. من أجل أن يمكن للمستخدم التنقل بين الصفحات المختلفة، أنشأنا "الوطن" صفحة. تم العثور على هذا في مقدمة الكتاب، ويظهر على هيئة أسود "الوطن" التبويب في حافة الصفحة. والفكرة هي أن تكتب 7 العبارات التي تستخدم أكثر من غيرها في هذه الصفحة، كما هو الصفحة التي تبدأ على الدوام. أيضا، في 8 من شرائط فارغة تكتب روابط لغيرها من 8 صفحات مزدوجة فارغة. يجب أن تكون هذه الأجزاء من حياتك التي تتطلب أكثر في عمق مجموعة من العبارات، قد تكون هذه المناطق مثل bathtime، أو الخروج في السيارة. على اليسار هو مثال على تخطيط الممكن للـ "الوطن" صفحة. الكلمات 8 بحروف عريضة وصلت إلى هوامش الصفحة مزدوج في مكان آخر في الكتاب. ما عليك فعله هو، تجد صفحة فارغة والكتابة، على سبيل المثال، "BED" في علامة التبويب الحافة، ثم على شرائط تكتب الـ 14 العبارات الأكثر ملاءمة لروتين وقت النوم الخاصة بك. ثم يمكنك تكرار العملية لأخرى 7 وصلات، حتى كتابك ممتلئ. إذا قمت بخطأ ما، أو ترغب في تغيير العبارة، ثم امسح فقط تشغيله بقطعة قماش مبللة والبدء من جديد.

استخدام speakbook، كنت تشير إلى شريكك الذي تريد التواصل. شريك حياتك يفتح speakbook إلى "الوطن" صفحة ويمكنك التواصل، على سبيل المثال، "BED". ثم يتحول شريك حياتك إلى "BED" صفحة ويمكنك بعد ذلك التواصل، "أريد أن أذهب إلى السرير" - أو أي كان. كل صفحة لها "الوطن" و "موجة" مطبوعة مسبقا على ذلك. "الوطن" هو بحيث يمكنك أن تحصل دائما العودة إلى "الوطن" صفحة (قد ترغب في "كأس من الشاي!" على النزول إلى السرير معك). و "موجة" الصفحة تسمح لك لتوضيح الكلمات والعبارات الفردية التي دون "تي تظهر في أي مكان آخر في الكتاب. وهو يعمل بطريقة مماثلة لصفحات أخرى، مع فارق واحد. في هذه الصفحة هناك 6 القطع الملونة، ولكل منها 6 حروف أو أرقام ملونة على ذلك. الأبجدية كلها هناك، بالإضافة إلى أرقام 1-9 (صفر استخدام الحرف O). نظرتم إلى الرسالة التي ترغب في التواصل، لثانية واحدة أو نحو ذلك، تليها كتلة اللون من نفس لون الرسالة التي اخترتها. شريك حياتك يتبع عينيك، ويرى أن كنت قد نظرت، على سبيل المثال، أعلى كتلة اليسار يليه أعلى كتلة اليمين (والذي هو الأخضر)، ويعلم أنك تريد "C".

يقول شريك حياتك "C" بصوت عال إلى تأكيد، ويمكنك الانتقال إلى الحرف التالي. شريك حياتك التخمينات بقية كلمة عندما يكون ذلك ممكنا، لتسريع عملية حتى.

Speakbook يتسع لـ 119 جمل من اختيارك. إذا كان هذا لا يكفي، أو إذا كنت تحتاج إلى أكثر من 14 العبارات في مقطع واحد معين، ثم يمكنك مضاعفة قدرتها من خلال كتابة جملتين في كل سطر، واحدة في قلم أسود، واحدة باللون الأحمر. اخترت عبارة السوداء بالطريقة العادية، واحدة حمراء وامض من قبل عندما نظرتم إلى رمز كبير.


قطع هذا الجزء.

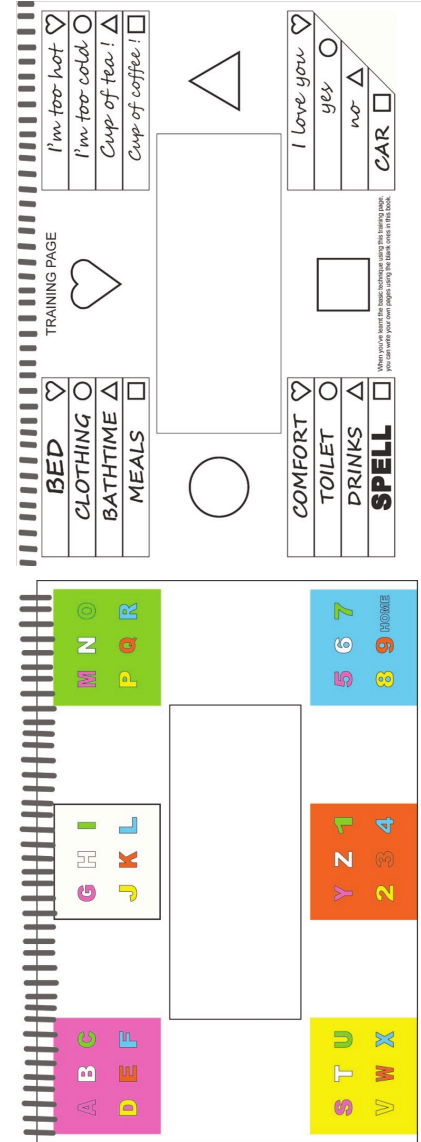



قطع هذا الجزء.

قطع هذا الجزء.

□	▷	○	♡

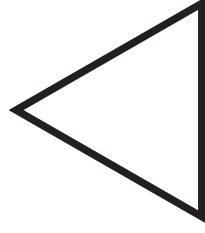


□	▷	○	♡

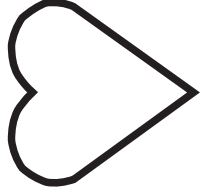

الصفحة الرئيسية

□	▷	○	♡

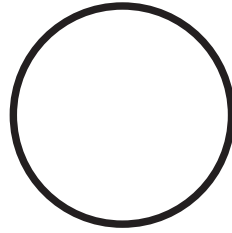

□	▷	○	♡


تهجئه

قطع هذا الجزء.

قلب	دائرة	مثلث	مربع
تجهته			




الصفحة الرئيسية




قطع هذا الجزء.

قلب	دائرة	مثلث	مربع


الصفحة الرئيسية

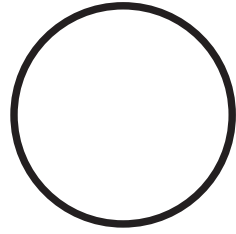







قطع هذا الجزء.






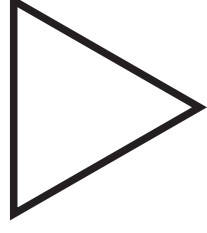


قلب	دائرة	مثلث	مربع

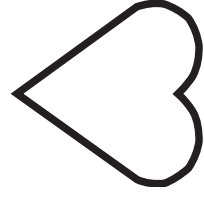

قلب	دائرة	مثلث	مربع

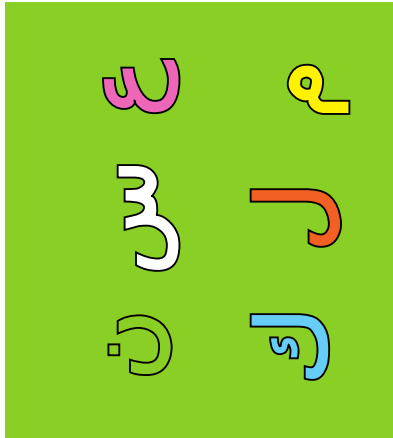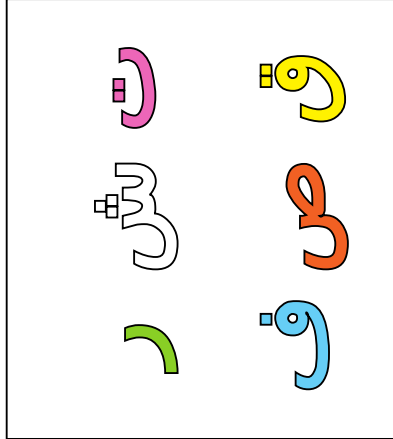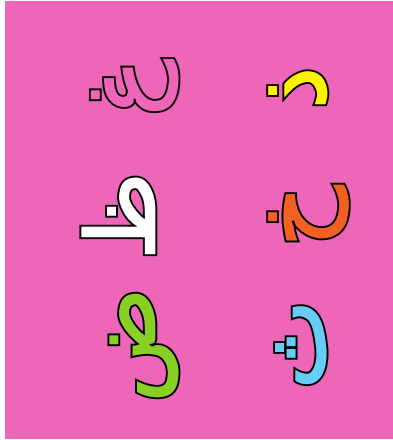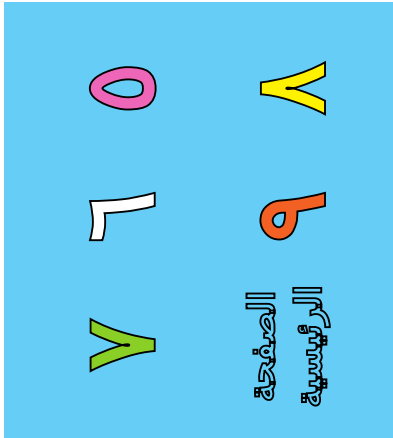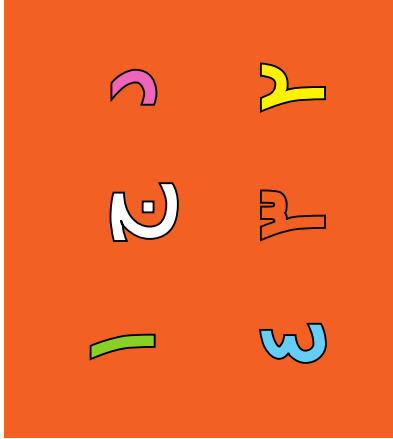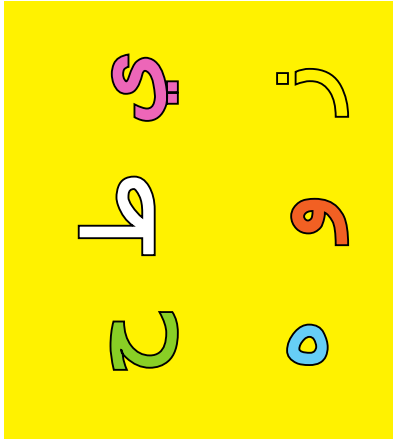

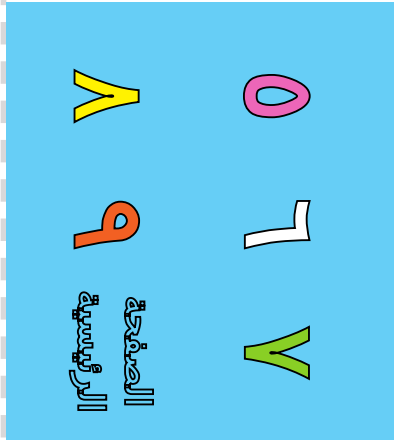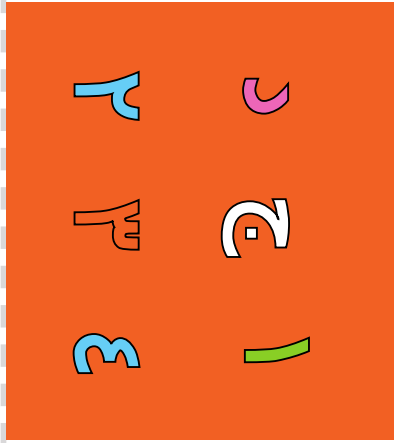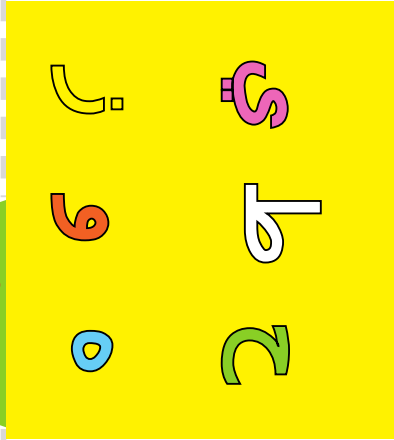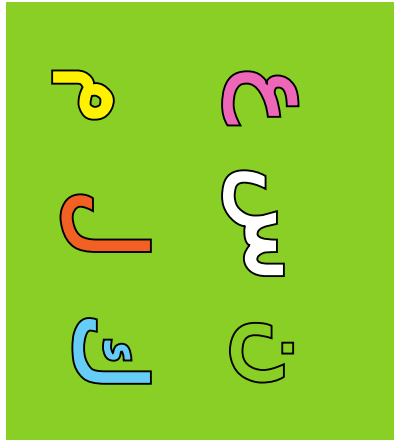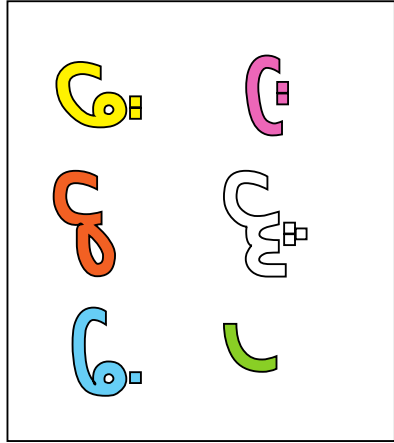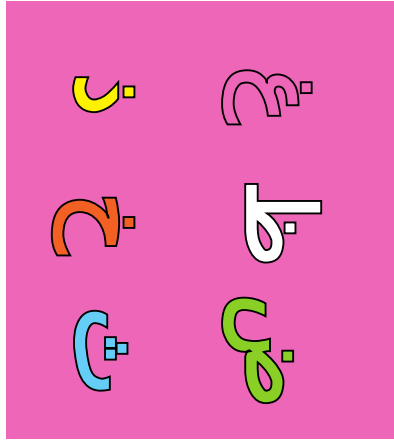



قطع هذا الجزء.




قطع هذا الجزء.


الصفحة الرئيسية

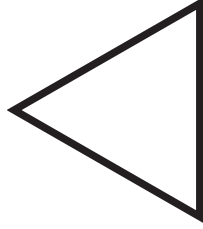



تهجئه

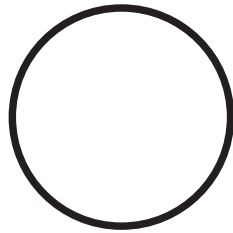


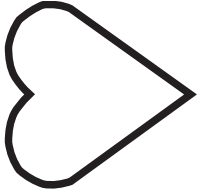


قطع هذا الجزء.




قلب	دائرة	مثلث	مربع
تجهته			




قلب	دائرة	مثلث	مربع
الصفحة الرئيسية			

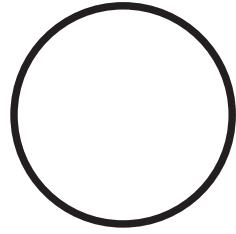

قطع هذا الجزء.

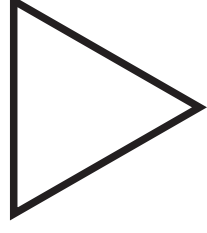



قلب	دائرة	مثلث	مربع
-----	-------	------	------

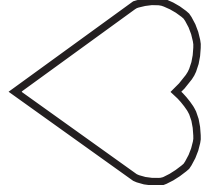


قلب	دائرة	مثلث	مربع
-----	-------	------	------


الصفحة الرئيسية

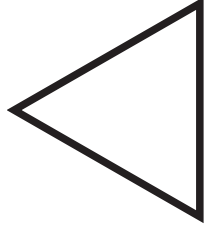





تهجئه

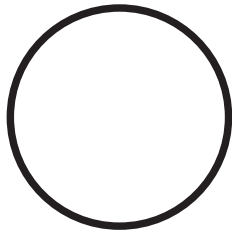


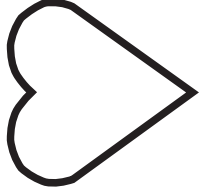

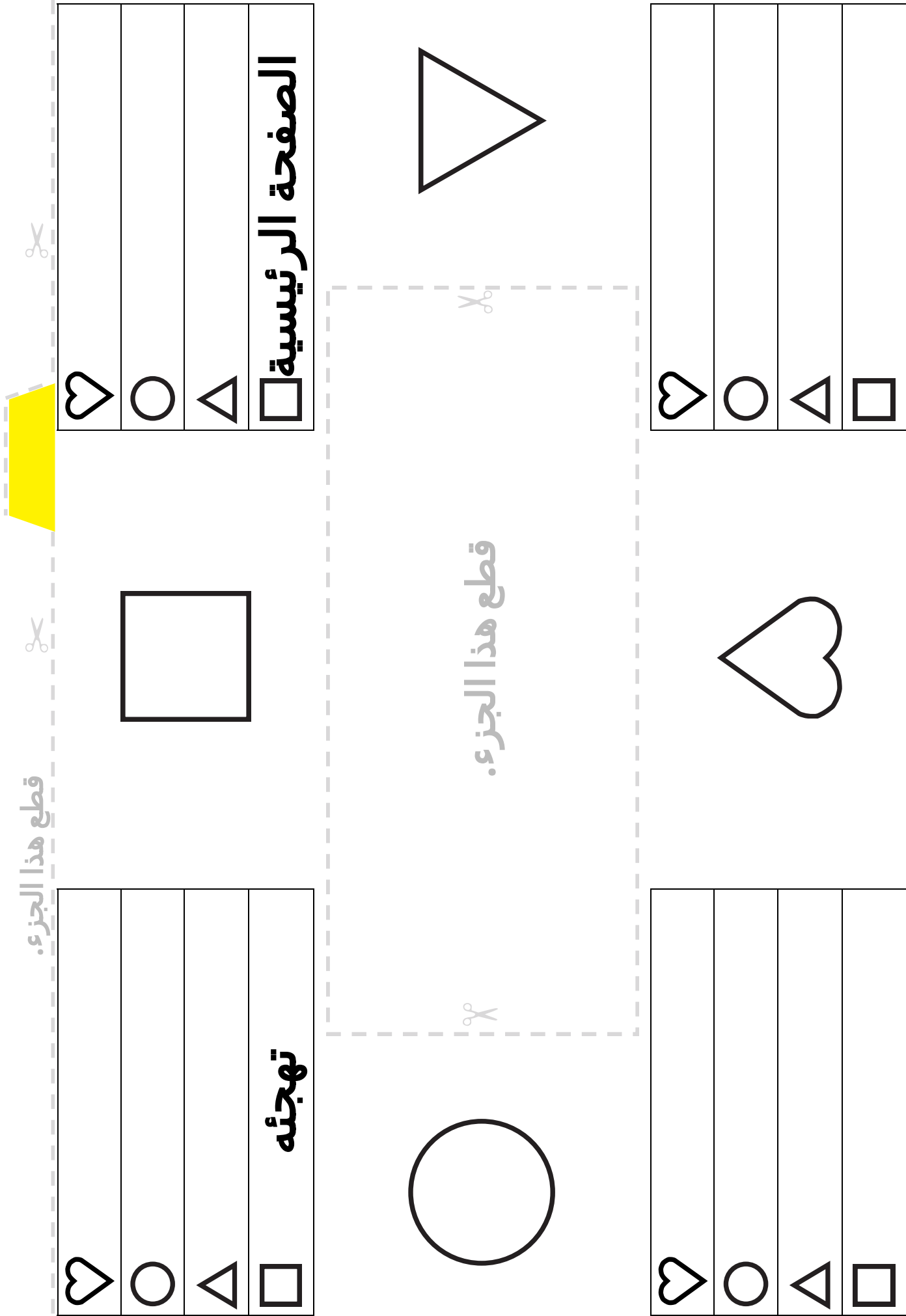



الصفحة الرئيسية

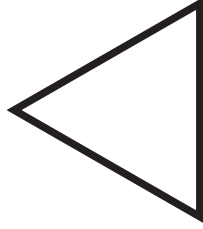




تهجئة

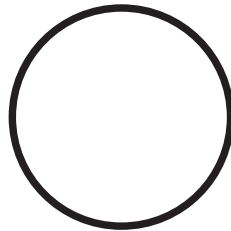

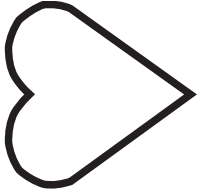

قطع هذا الجزء.


□	تجهته
△	
○	
♡	

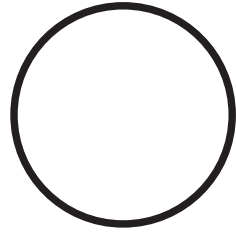


قطع هذا الجزء.

قطع هذا الجزء.

□	الصفحة الرئيسية
△	
○	
♡	

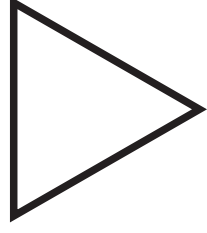



□	
△	
○	
♡	

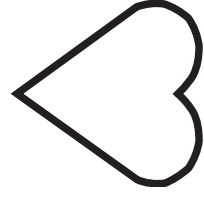


□	
△	
○	
♡	


الصفحة الرئيسية

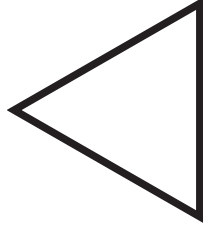



تهجئة

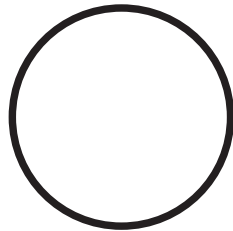

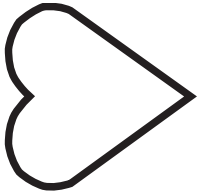


قطع هذا الجزء.



□	تجهئنه
△	
○	
♡	

قطع هذا الجزء.

□	الصفحة الرئيسية
△	
○	
♡	

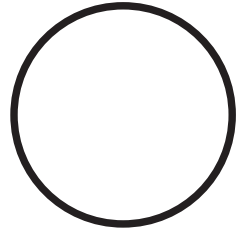

قطع هذا الجزء.

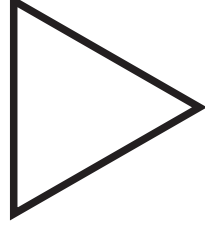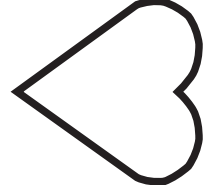



□	
△	
○	
♡	

□	
△	
○	
♡	





الصفحة الرئيسية

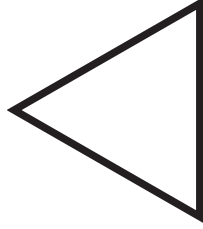



تهجئه

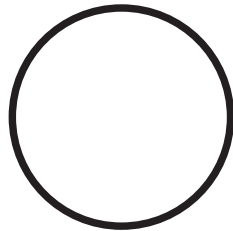


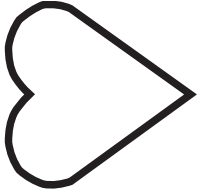





قطع هذا الجزء.

قلب	دائرة	مثلث	مربع
تجهته			

قلب	دائرة	مثلث	مربع
الصفحة الرئيسية			

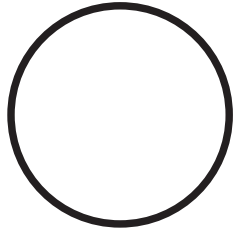


قطع هذا الجزء.

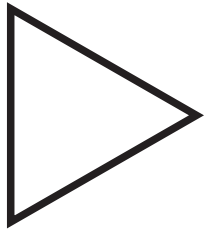



قلب	دائرة	مثلث	مربع

قلب	دائرة	مثلث	مربع

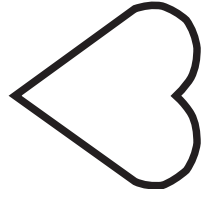



الصفحة الرئيسية

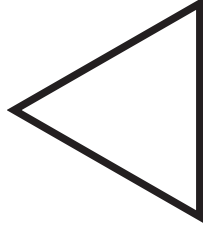



تهجئه

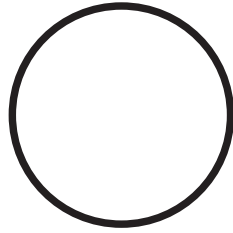

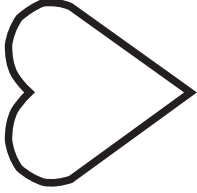





قطع هذا الجزء.




قلب	دائرة	مثلث	مربع
تجهته			

قلب	دائرة	مثلث	مربع
الصفحة الرئيسية			

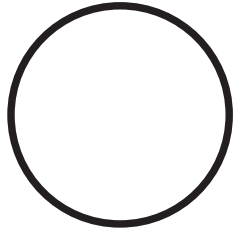


قطع هذا الجزء.

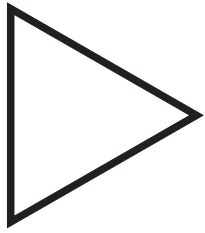



قلب	دائرة	مثلث	مربع
-----	-------	------	------

قلب	دائرة	مثلث	مربع
-----	-------	------	------

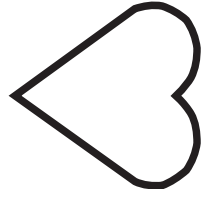



الصفحة الرئيسية

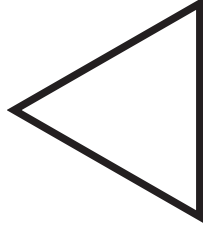



تهجئه

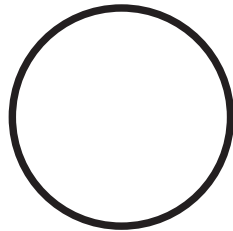

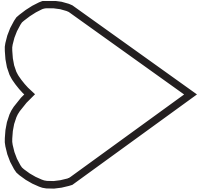




قطع هذا الجزء.




تجهئنه
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

الصفحة الرئيسية
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

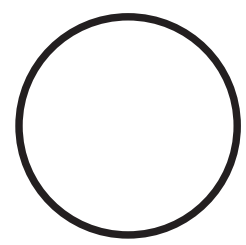



قطع هذا الجزء.

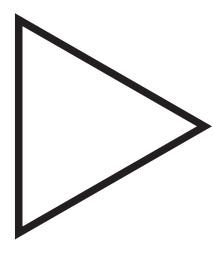



<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>


<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

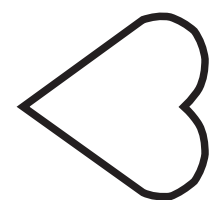

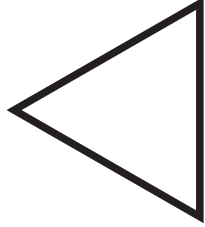



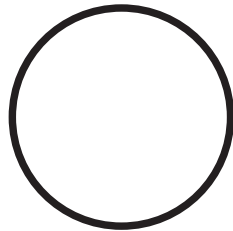


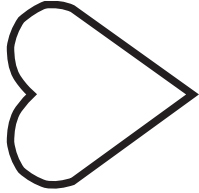




قطع هذا الجزء.


□	△	○	♡
تهجئه			




□	△	○	♡
الصفحة الرئيسية			

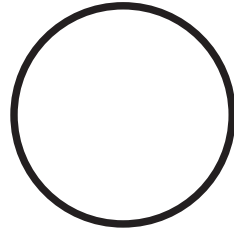

قطع هذا الجزء.

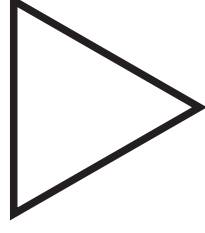




□	△	○	♡

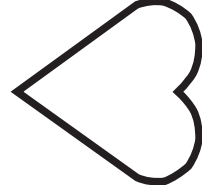


□	△	○	♡

السرير	♡
ملابس	○
وقت الاستحمام	△
وجبات	□

TRAINING PAGE

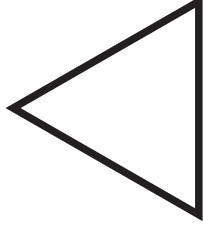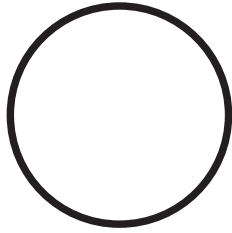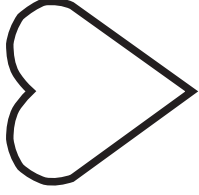

راحة	♡
الحمام	○
مشروبات	△
تهجئة	□



عندما كنت قد تعلمت هذه التقنية الأساسية باستخدام هذه الصفحة التدريب، يمكنك كتابة الصفحات الخاصة بك باستخدام تلك فارغة في هذا الكتاب.

أجزاء	♡
نعم	○
لا	△
سيارة	□


صفحة
التدوّل

انا حار جدا	♡
أنا بارد جدا	○
كوب من الشاي!	△
كوب من القهوة!	□



قطع هذا الجزء.

أحبك	♡
نعم	○
لا	△
سيارة	□

عند ما كنت قد تعلمت هذه التقنية الأساسية باستخدام هذه الصفحة التدريب، يمكنك كتابة الصفحات الخاصة بك باستخدام تلك فارغة في هذا الكتاب.




قطع هذا الجزء.

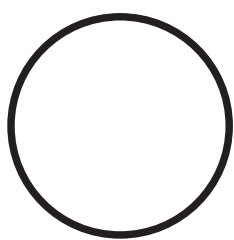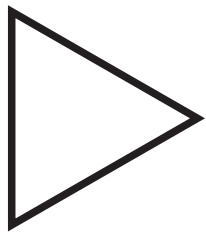

قطع هذا الجزء.

راحة	♡
الحمام	○
مشروبات	△
تهجنه	□

انا حار جدا	♡
أنا بارد جدا	○
كوب من الشاي!	△
كوب من القهوة!	□

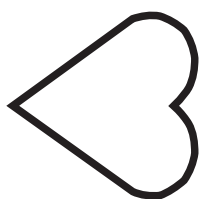

TRAINING PAGE

وجبات	□
وقت الاستحمام	△
ملابس	○
السريير	♡

إصبع الصفحة الإملائي.

إذا كنت لا تزال لديها استخدام يدك، ثم هذه الصفحة هي لك. من خلال الإشارة بإصبع
يمكنك توضيح الكلمات والعبارات لشريك حياتك. في كثير من الأحيان الكلمات المستخدمة
يمكن أن تكون مكتوبة في مربعات فارغة. مشيراً إلى الكلمة "الصفحة الرئيسية" *يشير
لشريك حياتك أنك الآن يريدون التواصل مع عينيك باستخدام الكتاب الرئيسي.

						%	د.ع	£	
٣	٢	١				/	-	+	
٦	٥	٤				?	=	X	
٩	٨	٧				الصفحة الرئيسية			
لا	.	نعم				شكرا			
ق	ر	ش	ت	ث	خ	ذ	ض	ظ	غ
ط	ي	ك	ل	م	ن	س	ع	ف	ص
أ	ب	ج	د		هـ	و	ز	ح	